




Akcesoria dla sterylizatorni

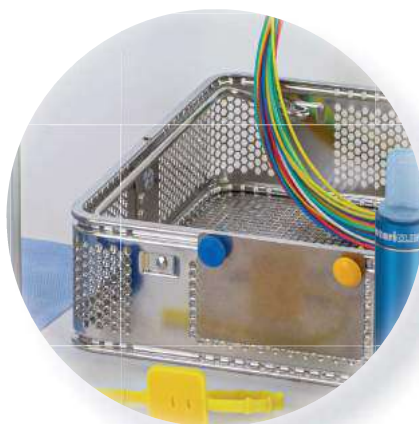

Nowy system kodowania kolorami stericlein®

Nasz nowy system kodowania kolorami stericlein® ułatwia orientację. Wizualizuje rozróżnienie pomiędzy naszymi obszarami produktów. W ten sposób zawsze można maksymalnie szybko zidentyfikować szukaną kategorię produktów. Ale to nie wszystko! Oprócz kodów kolorystycznych każdą kategorię produktów zaopatrzyliśmy w osobną ikonę, której symbolika w zwięzły sposób oddaje treść następnej strony.





Akcesoria do operacji

Akcesoria do zastosowań chirurgicznych i opieki nad pacjentem na sali operacyjnej



Akcesoria do czyszczenia

Dla efektywnego wspomaganie czyszczenia mechanicznego



Systemy wskaźnikowe

Wskaźniki do monitorowania procesu czyszczenia i sterylizacji i do uzupełnienia dokumentacji procesowej w zakresie parametrów



Przezroczyste opakowania

Do każdego zastosowania odpowiednia kombinacja materiałów



Opakowania w arkuszach

Ekonomiczność miękkich opakowań przekona również Państwa!



Akcesoria centralna sterylizatornia

Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji



Znakowanie / dokumentacja

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® do drukarek termotransferowych



Logistyka materiałów sterylnych

Do bezpiecznego transportu i magazynowania produktów medycznych

Oferujemy znacznie więcej...!



Serwis i doradztwo

Serwis i zadowoleni klienci są podstawą wszystkiego, co robimy. Doradzamy i wspieramy naszych klientów na całym świecie w siedmiu językach. Stale rosnące wymagania wobec personelu w centralnym dziale sterylizacji i działach specjalistycznych wymagają ciągłego szkolenia. Wspieramy w tym naszych klientów! Nasz kompetentny personel zapewni szczegółowe szkolenie teoretyczne i praktyczne na miejscu w zakresie prawidłowego użytkowania systemów barier sterylnych, akcesoriów do sterylizacji i systemów wskaźników. Ponadto organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty.



+48 22 715 71 86



biuro@amed.pl

Jakość i bezpieczeństwo

Nasze systemy bariery sterylnej są wytwarzane na nowoczesnych liniach produkcyjnych w warunkach czystych pomieszczeń i w oparciu o dokładnie zwalidowane procesy produkcyjne. Obejmuje to ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego i pełną identyfikowalność wspomaganą informatycznie wszystkich użytych materiałów. Każdy klient stericlin® może zawsze polegać na jakości naszych produktów.



Oferta produktów

Nasza szeroka oferta produktów obejmuje systemy wskaźników, systemy bariery sterylnej, akcesoria do sterylizacji, produkty do etykietowania i dokumentacji, produkty do logistyki wyrobów sterylnych oraz produkty higieniczne. Naszym celem jest ciągły rozwój produktów w oparciu o wymagania klientów oraz obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące wyrobów medycznych.



Możliwości dostawy

Nasza duża pojemność magazynowa i najnowocześniejsza technologia magazynowa gwarantują bezpieczny załadunek i krótkoterminową dostawę do klienta. Utrzymujemy kompleksowy system powiązanych ze sobą procesów, których optymalizacja prowadzi do coraz większego skrócenia czasu reakcji i dostaw.



Ochrona klimatu

Działania świadome ekologicznie są częścią naszej polityki korporacyjnej: działamy w sposób w 100% neutralny dla klimatu. Nieuniknione emisje są całkowicie rekompensowane przez uznawane na całym świecie certyfikaty redukcji emisji. Ponadto spełniamy wszystkie wymagania normy DIN EN ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem oraz DIN EN ISO 50001 w zakresie zarządzania energią.

Stericlin®

Akcesoria do operacji



NEW	Kaniule z tworzywa sztucznego	11
NEW	Jednorazowe tacki plastikowe	12
NEW	Plastikowe miski wielokrotnego użytku	13
NEW	Pętle naczyniowe	14
NEW	Podkładki pod przyrządy	15
NEW	Podkładka zaciskowa	16

Akcesoria do czyszczenia



NEW	Szczotki do czyszczenia	18
NEW	Szczotki do instrumentów z kanałami	19
NEW	Szczotki do czyszczenia endoskopów	21
NEW	Akcesoria do czyszczenia	22

Systemy wskaźnikowe



Systemy testowe Bowie-Dick

Pakiet Bowie-Dick do testowania jednorazowego	24
---	----

Paski wskaźnikowe Typu 6	27
Paski wskaźnikowe Typu 5	28
Paski wskaźnikowe Typu 4	29
Paski wskaźnikowe Typu 1	30

Przezroczyste opakowania



Torebki papierowo-foliowe	32
Opakowania włókninowo-foliowe	37
Z włókniny DuPont™ Tyvek® i folii	38

Opakowania w arkuszach



Arkusz podwójny SMS/SMS	40
Arkusz podwójny SMS/włóknina	41
SMS/SMS naprzemiennie pakowana	42
SMS/włóknina naprzemiennie pakowana	43
Włóknina/włóknina naprzemiennie pakowana	44
Polipropylen (SMS)	45
Włókniny	46
Papier krepowy	47



Akcesoria centralna sterylizatornia



Taśmy samoprzylepne	49	
Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych	51	
Akcesoria do koszy sitowych		
Chłonne maty absorpcyjne	52	
Ochrona narożników do koszy sitowych	53	
Zatyczki silikonowe	54	
Etykieta do sit	55	NEW
Akcesoria do kontenerów		
Wkłady absorpcyjne	56	
Etykiety do kontenerów	57	
Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	58	NEW
Zgrzew z tworzywa sztucznego	59	NEW
Plomby do kontenerów	62	
Filtry do kontenerów	63	
Opakowanie ochronne		
Przeciwpylowe opakowania posterylizacyjne	64	
Opakowania podezynfekcyjne	65	
Woreczki zabezpieczające do eksplantów	66	
Opakowania ochronne do sond USG	67	
Opaski kablowe z silikonu	68	NEW
Ochrona instrumentów		
Wykonane z papieru i folii	70	
Kapturki ochronne na narzędzia Highline	71	NEW
Testy kontroli zgrzewu		
Testy szczelności zgrzewów	73	
Testy zgrzewów Seal Test	74	
Akcesoria higieniczne		
Chusteczki z mikrofibry	75	
Worki na odpady z paskiem samoprzylepnym	76	
Karton do utylizacji	77	

Znakowanie / dokumentacja



Etykiety dokumentacyjne		
Etykiety samoprzylepne	79	NEW
Etykiety samoprzylepne do ręcznego znakowania	91	
System do dokumentowania wsadu dla konkretnego pacjenta	92	NEW
Etykiety Info z nadrukiem	93	NEW
Taśma identyfikacyjna	94	
Folie termotransferowe	95	
Pisaki	96	

Logistyka materiałów sterylnych



Opakowanie transportowe	98	NEW
Silikonowe maty siatkowe	100	NEW
Siateczkowe osłony kosza na narzędzia wykonane z silikonu	101	NEW
Tabliczki do koszy sitowych	102	NEW
Kosze na instrumenty i akcesoria	106	NEW

Dostarczamy produkty do ponad 70 krajów

Żadna odległość nie jest zbyt duża dla stericlin®. Kontakty na całym świecie, na miejscu w wielu krajach i nasze kompetentne biuro sprzedaży zapewniają optymalne, kompleksowe doradztwo i sprawny proces zamawiania. Sercem naszej działalności jest zakład produkcyjny i logistyczny w Niemczech. Z tej centralnej lokalizacji szybko i niezawodnie zaopatrujemy naszych klientów.



Korzyści dla klienta stericlin® / Made in Germany

Odpowiedzialność owocuje zaangażowaniem – od ponad 45 lat

Dlaczego stericlin®?

Od ponad 45 lat produkujemy pod marką stericlin® systemy wskaźników, systemy barier sterylnych i akcesoria do sterylizacji. Naszymi klientami są szpitale, gabinety lekarskie i usługodawcy w Niemczech i ponad 70 innych krajach.

Jakość i bezpieczeństwo

Nasze materiały tworzące bariery sterylnej są wytwarzane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych w warunkach czystych pomieszczeń i w oparciu o dokładnie zwalidowane procesy produkcyjne. Obejmują one całodobową kontrolę w trakcie procesu oraz pełną identyfikowalność w oparciu o IT wszystkich użytych materiałów. Każdy klient stericlin® może polegać na jakości naszych produktów.

Spełnianie wymagań określonych przez normy

Wymogi krajowych i międzynarodowych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych stanowią podstawę rozwoju i wytwarzania naszych produktów. Aby zapewnić statą i powtarzalną jakość, wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz ISO 13485. Produkcja odbywa się wyłącznie w warunkach pomieszczeń czystych. Spełniane przez nas międzynarodowe normy to DIN EN ISO 11140-4 i 11140-3 dla systemów testowych Bowie-Dick, DIN EN 867-5 dla systemów monitorowania partii oraz DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868 dla systemów bariery sterylnej. Ponadto umożliwiamy niezależne sprawdzenie naszych produktów pod kątem zgodności z surowymi wymaganiami norm. Na przykład, nasz jednorazowy pakiet testowy Bowie-Dick otrzymał znak Kitemark Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego (BSI), prestiżowego i uznanego na całym świecie instytutu badawczego.



Czyszczenie i dekontaminacja



Pakowanie instrumentów i poszczególnych części



Owijanie koszyków i zestawów narzędzi



Etykietowanie, znakowanie i dokumentacja



Przewożenie i przechowywanie



Monitorowanie i walidacja procesów



Akcesoria do operacji



Akcesoria do zastosowań chirurgicznych i opieki nad pacjentem na sali operacyjnej

- Kaniule z tworzywa sztucznego
- Tacki plastikowe
- Pętle naczyniowe
- Podkładki pod przyrządy
- Podkładka zaciskowa

Kaniule z tworzywa sztucznego

Przeznaczone do chirurgicznie inwazyjnego nawadniania, aplikacji i aspiracji, jak również do użytku nieinwazyjnego

Kaniule z tworzywa sztucznego są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu klasy medycznej i mają tę przewagę nad porównywalnymi kaniulami dostępnymi na rynku, że są dopuszczone jako produkt klasy IIa do użytku chirurgicznego inwazyjnego. Dlatego kaniule mogą być również wykorzystywane do zastosowań wykraczających poza czyste nawadnianie miejscowe ran.

Sterylnie zapakowane kaniule są higieniczną i ekonomiczną alternatywą dla konwencjonalnych kaniuli wielokrotnego użytku lub jednorazowych ze stali nierdzewnej.

Możliwość zginania kaniuli do 45° sprawia, że zakup różnych kaniuli krzywoliniowych nie jest już konieczny.

Aby spełnić wszystkie wymagania jakościowe, nie zastosowano w produkcji żadnych środków zmiękczających (DEHP) ani lateksu.


Oferujemy kaniule zarówno sterylne pakowane, jak i niesterylne.



3FINS166102 - xxx206



3FINS166102 - xxx106 / xxx202

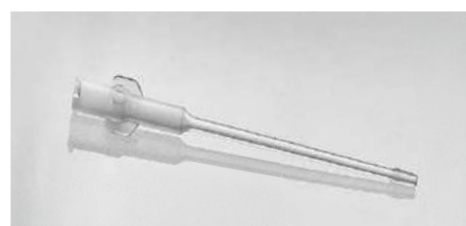

3FINS166108 - xxx112 / xxx204



3FINS166114 - xxx118 / xxx206

Nr art.	Opakowanie	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Średnica (mm)	Jednostka opakowania (sztuka)
3FINS166102	sterylny	50	28	0,9	24
3FINS166104	sterylny	50	28	0,9	48
3FINS166106	sterylny	50	28	0,9	200
3FINS166108	sterylny	70	48	0,9	24
3FINS166110	sterylny	70	48	0,9	48
3FINS166112	sterylny	70	48	0,9	150
3FINS166114	sterylny	103	81	1,0	24
3FINS166116	sterylny	103	81	1,0	48
3FINS166118	sterylny	103	81	1,0	150
3FINS166202	niesterylne	50	28	0,9	200
3FINS166204	niesterylne	70	48	0,9	150
3FINS166206	niesterylne	103	81	1,0	150

Jednorazowe tacki plastikowe

Sterylnie zapakowane – gotowe do natychmiastowego użycia, do higienicznej i wydajnej pracy w różnych obszarach funkcjonalnych

NEW



Art. 3FSOP187202 - xxx210



Tacka 250 ml wraz z pokrywą



Art. 3FSOP187204

Ponowne przetwarzanie taczek wielokrotnego użytku jest czasochłonne, kosztowne i wymaga dużych nakładów finansowych. Dzięki zastosowaniu jednorazowych taczek można usprawnić procesy wewnętrzne w AEMP, a uzyskane w ten sposób moce produkcyjne wykorzystać z powodzeniem w innych miejscach.

Szeroka gama rozmiarów i kolorów gwarantuje szeroki zakres zastosowań w różnych działach.

Wszystkie tacki są wyposażone w umieszczoną wewnątrz skalę pomiarową i są dostępne również w wersji niesterylnej.

Nr art.	Wersja	Pojemność (ml)	Kolor	VE (sztuka)
3FSOP187202	Tacka, niesterylna	250	przezroczysta	500
3FSOP187204	Tacka, niesterylna	250	niebieski	500
3FSOP187206	Tacka, niesterylna	250	czerwony	500
3FSOP187208	Tacka, niesterylna	250	zielony	500
3FSOP187210	Tacka, niesterylna	250	żółty	500
3FSOP187212	Tacka, niesterylna	500	przezroczysta	300
3FSOP187214	Tacka, niesterylna	500	niebieski	300
3FSOP187218	Tacka, niesterylna	500	zielony	300
3FSOP187224	Tacka, niesterylna	1000	niebieski	270
3FSOP187102	Tacka, sterylna	250	przezroczysta	50
3FSOP187104	Tacka, sterylna	250	niebieski	50
3FSOP187106	Tacka, sterylna	250	czerwony	50
3FSOP187108	Tacka, sterylna	250	zielony	50
3FSOP187110	Tacka, sterylna	250	żółty	50
3FSOP187112	Tacka, sterylna	500	przezroczysta	40
3FSOP187114	Tacka, sterylna	500	niebieski	40
3FSOP187118	Tacka, sterylna	500	zielony	40
3FSOP187124	Tacka, sterylna	1000	niebieski	30
3FSOP187250	Pokrywka, niesterylna	Do taczek o pojemności 250 ml	przezroczysta	500
3FSOP187150	Pokrywka wraz z tacką, sterylna	250	przezroczysta	50
3FSOP187152	Pokrywka wraz z tacką, sterylna	250	niebieski	50
3FSOP187154	Pokrywka wraz z tacką, sterylna	250	czerwony	50
3FSOP187156	Pokrywka wraz z tacką, sterylna	250	zielony	50
3FSOP187158	Pokrywka wraz z tacką, sterylna	250	żółty	50
3FSOP187160	Zestaw zawiera 3 tacki, sterylna	1x 250 2x 500	niebieski	40



Plastikowe miski wielokrotnego użytku

Jako ekonomiczna alternatywa dla misek ze stali nierdzewnej

NEW

Plastikowe miski wielokrotnego użytku mają różnorodne zastosowania ze względu na dostępne kolory i rozmiary. Na przykład materiały eksploatacyjne (waciki, kompresy, narzędzia, materiały do szycia itp.) można łatwo oddzielić od siebie za pomocą różnych kolorów i szybko sprawdzić pod kątem kompletności pooperacyjnej. Ponadto miski to ogromne odciążenie budżetu ze względu na niskie koszty zakupu.

Możliwa jest wielokrotna dekontaminacja przy użyciu najpopularniejszych procedur czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji parowej.

Wszystkie miski wyposażone są w wewnętrzną skalę pomiarową.



Nr art.	Wersja	Pojemność (ml)	Kolor	VE (sztuka)
3FSOP187304	Tacka, niesterylna	150	niebieski	10
3FSOP187308	Tacka, niesterylna	150	zielony	10
3FSOP187310	Tacka, niesterylna	150	żółty	10
3FSOP187314	Tacka, niesterylna	500	niebieski	10
3FSOP187318	Tacka, niesterylna	500	zielony	10
3FSOP187320	Tacka, niesterylna	500	żółty	10
3FSOP187324	Tacka, niesterylna	1000	niebieski	10
3FSOP187334	Tacka, niesterylna	2500	niebieski	10

Pętla naczyniowe

Służy do śródoperacyjnej organizacji i znakowania tętnic, żył, nerwów lub ścięgien

NEW



Art. 3FSOP186114 + xxx110 + xxx102



Art. 3FSOP186116 + 3FSOP186108



Art. 3FSOP186112 + xxx104 + xxx102



Art. 3FSOP186118 + xxx110



Art. 3FSOP186114 + xxx106

Cztery kolory i różne warianty mogą być wykorzystane do identyfikacji naczyń i struktur anatomicznych.

Pętla naczyniowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nr art.	Oznaczenie	Rozmiar (mm)	Długość (cm)	Kolor	Jednostka opakowania (sztuka)
3FSOP186102	maxi-super	4,7 × 1,3	45	niebieski	20 (10 × 2)
3FSOP186104	maxi	2,4 × 1,15	45	niebieski	20 (10 × 2)
3FSOP186106	maxi	2,4 × 1,15	45	czerwony	20 (10 × 2)
3FSOP186108	maxi	2,4 × 1,15	45	biały	20 (10 × 2)
3FSOP186110	maxi	2,4 × 1,15	45	żółty	20 (10 × 2)
3FSOP186112	mini	1,3 × 0,9	45	niebieski	20 (10 × 2)
3FSOP186114	mini	1,3 × 0,9	45	czerwony	20 (10 × 2)
3FSOP186116	mini	1,3 × 0,9	45	biały	20 (10 × 2)
3FSOP186118	mini	1,3 × 0,9	45	żółty	20 (10 × 2)



Podkładki pod przyrządy


Chronią cienki i delikatny materiał chirurgiczny do zszywania przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie imadeł chirurgicznych

NEW

Antypoślizgowa powierzchnia pozwala na pewne trzymanie materiału do zszywania i może być również oznaczana różnymi kolorami. Zestawianie sprzętu w pary umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie na przyrządach. Dozowniki mają samoprzylepny grzbiet.

Dzięki przejrzystej konstrukcji dozowników po zakończeniu operacji można szybko zweryfikować kompletność sprzętu.

Podkładki pod przyrządy są kontrastowe, nie zawierają lateksu, są sterylne zapakowane i zgłoszone do jednorazowego użytku.

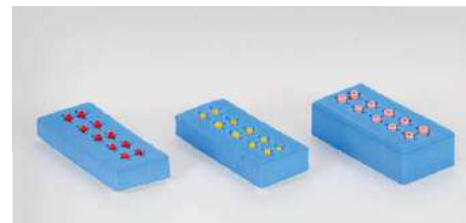


Art. 3FINS167102 - xxx106



Art. 3FINS167102 - xxx106



Art. 3FINS167102

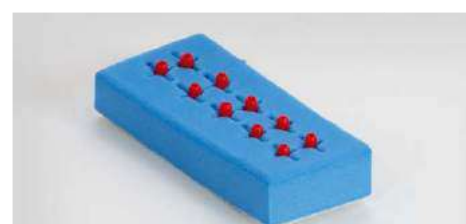

Art. 3FINS167104

Nr art.	Rozmiar	Kolor	Jednostka opakowania (sztuka)
3FINS167102	normalny	żółty	50 (25 par)
3FINS167104	normalny	czerwony	50 (25 par)
3FINS167106	duży	czerwony	50 (25 par)

Podkładka zaciskowa

Do atraumatycznego zaciskania naczyń i tkanek

NEW



Art. 3FINS167152 - xxx156



Art. 3FINS167156

Profil zapewnia pewne trzymanie i jednocześnie zapewnia delikatne stosowanie konwencjonalnych zacisków. Trzy dostępne średnice zapewniają dokładne dopasowanie do różnych rozmiarów instrumentów i umożliwiają przycinanie na wymiar.

Podkładki zaciskowe są radioprzeczyste, nie zawierają lateksu, są sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nr art.	Rozmiar	Kolor	Długość (mm)	Jednostka opakowania (sztuka)
3FINS167152	mini	czerwony	125	40 (20 × 2)
3FINS167154	midi	biały	125	40 (20 × 2)
3FINS167156	maxi	niebieski	125	20 (10 × 2)



steriCLIN®

Akcesoria do czyszczenia



Dla efektywnego wspomagania czyszczenia mechanicznego

- Szczotki do czyszczenia
- Szczotki do instrumentów z kanałami
- Szczotki do czyszczenia endoskopów
- Akcesoria do czyszczenia

Szczotki do czyszczenia stericlin®

Do ręcznego (wstępnego) czyszczenia

NEW



Art. 3FRIN550116 - xxx158



Art. 3FRIN550172 - xxx176



Art. 3FRIN550134



Art. 3FRIN550160 + xxx162



Art. 3FRIN550136 - xxx168

Ręczne (wstępne) czyszczenie wyrobów medycznych jest regulowane w ustawach, normach i wytycznych. Rekomendacja KRINKO / BfArM wspomina między innymi, że przy czyszczeniu wstępnym powinny być stosowane środki mające tolerancję materiałową i dopasowane do wyrobu medycznego. W odpowiedzi na to stericlin® oferuje zaawansowany asortyment szczotek do czyszczenia do różnych zastosowań i typów przyrządów.

Oprócz tego w asortymencie zawarte są środki pomocnicze, jak uchwyty i nakładki czyszczące, które dodatkowo wspomagają proces oczyszczania.

Nr art.	Opis	Długość górnej części szczotki (mm)	Długość (mm)	Do przetworzenia	Opakowanie handlowe (sztuka)
3FRIN550116	dwustronne / miękkie włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego	25 / 35	175	tak	5
3FRIN550120	dwustronne / średnio twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego	25 / 35	175	tak	5
3FRIN550158	dwustronne / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego	30 / 40	175	tak	5
3FRIN550172	twarde włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego (zielony)	80 x 18 x 15	220	nie	10
3FRIN550174	miękkie włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego (żółty)	80 x 18 x 15	220	nie	10
3FRIN550176	bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego (niebieski)	80 x 18 x 10	220	nie	10
3FRIN550134	niebieskie / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego	30 / 45	165	tak	5
3FRIN550160	bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego	75	215	tak	5
3FRIN550162	miękkie włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa	75	215	tak	5
3FRIN550164	bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego	75	235	tak	5
3FRIN550136	włosie ze stali szlachetnej / uchwyt z tworzywa sztucznego *	40	178	nie	5
3FRIN550166	włosie mosiężne / uchwyt z tworzywa sztucznego *	40	178	nie	5
3FRIN550168	włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa sztucznego *	40	178	nie	5

* Tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi. Dlatego nie jest to wyrób medyczny.

Stericlin® szczotki do instrumentów z kanałami

Do ręcznego (wstępnego) czyszczenia

Ręczne (wstępne) czyszczenie wyrobów medycznych jest uregulowane w przepisach, normach i wytycznych. Zgodnie z zaleceniem KRINKO / Federalnego Instytutu Farmaceutyków i Produktów Medycznych do czyszczenia wstępnego należy między innymi stosować środki, które są odpowiednie, kompatybilne z materiałem i dobrane do produktu medycznego. Stosownie do tego stericlin® oferuje szeroką gamę szczotek czyszczących do różnych celów i typów instrumentów.

Asortyment obejmuje również środki pomocnicze, takie jak uchwyty i podkładki czyszczące, które dodatkowo wspomagają proces przygotowania.

Wszystkie szczotki stericlin® do czyszczenia instrumentów z kanałami posiadają wysokiej jakości nylonowe włosie.



Nr art.	Głowa szczotki: Ø x L (mm)	Długość całkowita (mm)	Do przetworzenia	Właściwości	Opakowanie handlowe (sztuka)
3FRIN550154	0,6 x 10	450	niezalecane		5
3FRIN550118	1,0 x 13	450	tak		5
3FRIN550156	1,4 x 13	450	tak		5
3FRIN550122	1,6 x 13	450	tak		5
3FRIN550132	1,8 x 13	450	tak		5
3FRIN550146	2,0 x 100	300	tak		5
3FRIN550150	2,0 x 60	350	tak		5
3FRIN550126	2,5 x 50	300	tak		5
3FRIN550128	2,5 x 50	610	tak		5
3FRIN550148	3,0 x 100	300	tak		5
3FRIN550142	3,5 x 100	250	tak		5
3FRIN550144	3,5 x 60	265	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego (Biały)	5
3FRIN550152	3,5 x 35	500	tak		5
3FRIN550104	4,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550124	5,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550130	5,0 x 80	405	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550190	5,0 x 100	650	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550106	6,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550102	7,0 x 80	350	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550192	7,0 x 100	650	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550108	8,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550110	10,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550194	10,0 x 100	650	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550196	12,0 x 100	650	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550112	15,0 x 100	300	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550138	20,0 x 150	450	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550140	20,0 x 100	500	tak	Oslona końcówki	5
3FRIN550141	40,0 x 60	500	tak	Oslona końcówki	5

NEW



Art. 3FRIN550178 - xxx188



Art. 3FRIN550188

Stericlin® szczotki do instrumentów z kanałami

Nr art.	Głowa szczotki: Ø x L (mm)	Długość całkowita (mm)	Do przetworzenia	Właściwości	Opakowanie handlowe (sztuka)
3FRIN550178	3,0 x 20	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (biały)	5
3FRIN550180	4,0 x 20	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (niebieski)	5
3FRIN550182	5,0 x 50	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (żółty)	5
3FRIN550184	7,0 x 50	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (biały)	5
3FRIN550186	10,0 x 50	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (niebieski)	5
3FRIN550188	15,0 x 50	600	nie	Trzonek z tworzywa sztucznego (zielony)	5


Szczotki do czyszczenia endoskopów

Do manualnego czyszczenia wstępnego

Ręczne (wstępne) czyszczenie endoskopów giętkich i akcesoriów endoskopowych jest standardowo wymagane w różnych wytycznych i stanowi istotną część skutecznego czyszczenia. W celu uniknięcia możliwych zanieczyszczeń krzyżowych, w odpowiedniej literaturze odradza się wielokrotne stosowanie szczotek do czyszczenia endoskopów. Dlatego też nasze szczotki do czyszczenia endoskopów elastycznych są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Oferujemy szeroki asortyment szczotek, które mogą być używane do wstępnego czyszczenia najczęstszych kanałów roboczych i portów biopsji różnych typów endoskopów przed czyszczeniem maszynowym.

W celu osiągnięcia idealnego efektu czyszczenia, a jednocześnie uniknięcia zarysowania wrażliwych kanałów, szczotki są wyposażone w plastikową głowicę kulową i w średnio twarde nylonowe włosie.

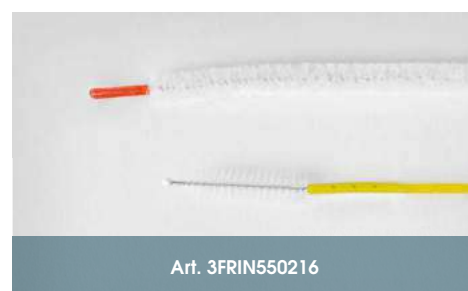

Nr art.	Wymiary głowicy szczotki Ø (mm)	Całkowita długość (mm)	Właściwości	Opakowanie handlowe (sztuka)
3FRIN550202	2,0	1000	Kolor: żółty	50
3FRIN550204	3,0	1000	Kolor: biały	50
3FRIN550224	2,5	2300	Kolor: czerwony	50
3FRIN550212	3,0	2300	Kolor: niebieski	50
3FRIN550208	5,0	2300	Kolor: czerwony	50
3FRIN550210	6,0	2300	Kolor: zielony	50
3FRIN550214	3,0-5,0 / 4,0-6,0	2300	Kolor: żółty	50
3FRIN550220	5,5 / 10	2300	Kolor: turkus	50
3FRIN550216	5,0	2650	ze środkiem do czyszczenia rur (280 mm) Kolor: żółty	50
3FRIN550218	5,2 / 11	156	Szczotka z zaworem do czyszczenia endoskopu, kolor: czerwony	100
3FRIN550206	6,5 5,2 / 11	2570 156	Zestaw zawiera: szczotka do czyszczenia, kolor: niebieski; szczotka z zaworem do czyszczenia endoskopu, kolor: czerwony	50
3FRIN550222	5,0 5,2 / 11	2300 156	Zestaw zawiera: szczotka do czyszczenia, kolor: czerwony; szczotka z zaworem do czyszczenia endoskopu, kolor: czerwony	50
3FRIN550226	3,0	2500	2 końcówki + 1 środkowy, w tym plastikowa końcówka, Kolor: czerwony	50
3FRIN550228	6,0	2500	2 końcówki + 1 środkowy, w tym plastikowa końcówka, Kolor: niebieski	50

Stericlin® akcesoria do czyszczenia

Dla efektywnego wspomagania czyszczenia mechanicznego

NEW



Stericlin® uchwyt w użyciu



Art. 3FEDS844102 – 3FEDS844110



Zestaw stericlin® Hydro Soak - Art. 3FRIN556105



Podkładki czyszczące - Art. 3FRIN556120



Podkładki czyszczące - Art. 3FRIN556125

Akcesoria do czyszczenia stericlin® ułatwiają wykonywanie różnych czynności związanych z czyszczeniem w obrębie AEMP.

Minimalizując niewyczyszczone obszary, otwieracze stericlin® są nieodzowną pomocą w skutecznym czyszczeniu. Czyszczenie i dezynfekcja kleszczy, instrumentów bez możliwości demontowania z rękojeściami pierścieniowymi, wzierników i innych instrumentów nieotwierających się samodzielnie jest szczególnym wyzwaniem w krytycznych obszarach, takich jak przeguby lub części szczęk.

Zestawy stericlin® Hydro Soak Sets pomagają w transporcie, przechowywaniu, a także utrzymaniu wilgoci dystalnych końcówek instrumentów laparoskopowych oraz ramion EndoWrist®.

Ze względu na swoje właściwości materiałowe, nasze podkładki czyszczące są wszechstronne i idealnie nadają się do: szlifowania, polerowania rdzy nalotowej oraz powierzchni utlenionych, takich jak stoły robocze, wózki transportowe czy komory sterylizacyjne. Przeznaczone do stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Nr art.	Opis	Wymiary (mm)	Opakowanie handlowe (sztuka)
3FEDS844100	Uchwyt do nie samomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, Kolor: biały	40	1
3FEDS844108	Uchwyt do nie samomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, Kolor: żółty	50	1
3FEDS844106	Uchwyt do nie samomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, Kolor: niebieski	60	1
3FEDS844102	Uchwyt do nie samomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, Kolor: czerwony	70	1
3FEDS844110	Uchwyt do nie samomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, Kolor: zielony	80	1
3FEDS844104	Uchwyt na instrumenty z okrągłym uchwytem, ze stali nierdzewnej		1
3FRIN556105	Stericlin® Hydro Soak Set, do transportu, przechowywania i utrzymywania wilgoci dystalnych końcówek instrumentów laparoskopowych oraz ramion EndoWrist®, do jednorazowego użytku		20
3FRIN556107	Zestaw stericlin® Hydro Soak Set, do transportu, przechowywania i nawadniania kleszczyków bipolarnych, jednorazowego użytku		20
3FRIN556120	Podkładki czyszczące – grube, do usuwania plam i rdzy, Kolor: brązowy	150 x 100	3
3FRIN556125	Podkładki czyszczące – cienkie, do usuwania plam i rdzy, Kolor: szary	150 x 100	3

steriCLIN®



Systemy wskaźnikowe



Wskaźniki do monitorowania procesu czyszczenia i sterylizacji i do uzupełnienia dokumentacji procesowej w zakresie parametrów

- Systemy testowe Bowie-Dick
- BMS 1200 batch monitoring system
- Paski wskaźnikowe Typu 6 – Typu 1

Pakiet Bowie-Dick stericlin® do testowania jednorazowego

Bardzo łatwe posługiwanie się testem penetracji pary wodnej – DIN EN ISO 11140-4



Bowie-Dick do testowania jednorazowego

Nasz test Bowie-Dick stericlin® jednorazowego użytku pozwala na codzienną kontrolę poprawnego funkcjonowania i jakości posiadanego sterylizatora parowego. Na szczególną uwagę zasługuje prostota posługiwania się testem:

- Pakiet testowy umieścić w sterylizatorze
- Przeprowadzić program Bowie-Dick
- Wyjąć arkusz testowy
- Sprawdzić wynik

Przy całkowitej penetracji wodnej wskaźnik zmienia równomiernie barwę z niebieskiej na różową. Gdy urządzenie funkcjonuje wadliwie, zmiana barwy jest nierównomierna.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Znak jakości Kitemark brytyjskiego instytutu British Standards Institution (BSI)

Renomowany, międzynarodowy instytut badawczy potwierdza zgodność naszego pakietu Bowie-Dick jednorazowego użytku ze ścisłymi wymogami normy DIN EN ISO 11140-4.



Oryginalny arkusz testowy



Karta testowa dla powodzenia



Karta testowa dla niepowodzenia

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSKS611102	Pakiet Bowie-Dick do testowania jednorazowego	40

Paski wskaźnikowe Typu 6 (STEAM) stericlin®

Emulacyjne wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN ISO 11140-1

Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 6 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne systemy barier sterylnych.


Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:

- Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
- Wykonać program sterylizacji
- Wyjąć pasek wskaźnikowy
- Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 6 (emulatory). Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo precyzyjnego, kontrolnego rezystometru. Dzięki temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

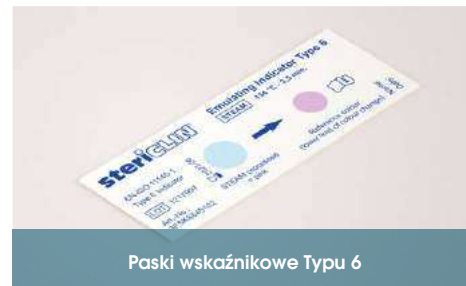

Paski wskaźnikowe Typu 6

Nr art.	Opis	Wielkość	Zawartość kartonu (szt.)
3FSKS645102	134 °C – 3,5 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645104	132 °C – 4 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645105	134°C - 4 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645106	134 °C – 5,3 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645108	134 °C – 7 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645112	134 °C – 18 min.	80 × 30 mm	500

Paski wskaźnikowe Typu 5 (STEAM) stericlin®

Integrujące wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN ISO 11140-1



Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 5 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Wytyczne dla nich wynikają z zachowania biologicznych wskaźników. W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne systemy barier sterylnych. Wskaźnik Typu 5 jest szczególnie korzystny wtedy, gdy przygotowywane do użytku produkty medyczne są sterylizowane zarówno w temperaturze 121 °C, jak i 134 °C.

Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:

- Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
- Wykonać program sterylizacji
- Wyjąć pasek wskaźnikowy
- Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 5 (integratory). Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo precyzyjnego, kontrolnego rezystometru. Dzięki temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Nr art.	Opis	Wielkość	Zawartość kartonu (szt.)
3FSKS646102	134 °C/121 °C	80 × 30 mm	500

Paski wskaźnikowe Typu 4 (STEAM) stericlin®

Wieloparametrowe wskaźniki według EN ISO 11140-1

Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 4 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary, temperatury i czasu wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne systemy barier sterylnych.


Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:

- Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
- Wykonać program sterylizacji
- Wyjąć pasek wskaźnikowy
- Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 4 (wskaźniki wieloparametrowe). Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo precyzyjnego rezystometru do celów kontrolnych. Dzięki temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

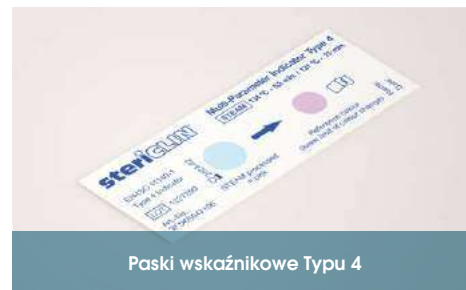

Paski wskaźnikowe Typu 4

Nr art.	Opis	Wielkość	Zawartość kartonu (szt.)
3FSKS647102	134 °C – 3,5 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS647106	134 °C – 5,3 min./ 121 °C – 15 min.	80 × 30 mm	500

Paski wskaźnikowe stericlin® Typu 1 (STEAM)

Wskaźniki procesu według DIN EN ISO 11140-1



3FSKS650102



3FSKS650104



3FSKS650106

Paski wskaźnikowe stericlin® Typu 1 pozwalają na prostą kontrolę sterylizacji i na dokumentowanie. Te paski wskaźnikowe są dostępne dla sterylizacji STEAM, EO i FORM. Jako wskaźniki procesu sterylizacji pomagają one rozpoznać produkty wysterylizowane i niesterylizowane.

Pola opisowe dla wsadu, sterylizatora, zawartości, daty ważności, oceny wyniku procesu sterylizacji (OK/Fail) oraz pole do podpisu są nadrukowane na paskach wskaźnikowych stericlin® Typu 1.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 1 (wskaźnik procesu sterylizacji).

Nr art.	Opis	Wielkość	Zawartość kartonu (szt.)
3FSKS650102	STEAM, samoprzylepne	150 × 30 mm	250
3FSKS650104	STEAM	150 × 30 mm	250
3FSKS650106	FORM	150 × 30 mm	250



steriCLIN®



Przezroczyste opakowania



Do każdego zastosowania odpowiednia kombinacja materiałów

- Przezroczyste torebki papierowo-foliowe
- Przezroczyste opakowania włókninowo-foliowe
- Przezroczyste opakowania stericlin® z włókniny DuPont™ Tyvek® i folii

Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin[®], płaskie

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607



Przezroczyste torebki stericlin[®] spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin[®] z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.

Nr art.	Wielkość w cm (szerokość x długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FKFB210102	5,5 x 20	2000
3FKFB210104	5,5 x 25	2000
3FKFB210106	7,5 x 15	2000
3FKFB210108	7,5 x 20	2000
3FKFB210110	7,5 x 25	2000
3FKFB210112	7,5 x 30	2000
3FKFB210114	10 x 15	2000
3FKFB210116	10 x 20	2000
3FKFB210118	10 x 25	2000
3FKFB210120	10 x 30	2000
3FKFB210122	10 x 36	1000
3FKFB210124	10 x 40	1000
3FKFB210126	10 x 52	1000
3FKFB210128	12,5 x 25	2000
3FKFB210130	12,5 x 30	2000
3FKFB210131	12,5 x 35	1000
3FKFB210132	12,5 x 40	1000
3FKFB210134	12,5 x 52	1000
3FKFB210136	15 x 20	1000
3FKFB210138	15 x 27	1000
3FKFB210140	15 x 30	1000
3FKFB210142	15 x 38	1000
3FKFB210143	15 x 50	1000
3FKFB210144	15 x 61	1000
3FKFB210146	16 x 22	1000



Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin®, płaskie

Nr art.	Wielkość w cm (szerokość × długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FKFB210148	20 × 27	1000
3FKFB210150	20 × 40	1000
3FKFB210152	20 × 61	1000
3FKFB210154	21 × 33	1000
3FKFB210156	22 × 30	1000
3FKFB210158	22 × 35	1000
3FKFB210160	22 × 42	1000
3FKFB210162	25 × 38	1000
3FKFB210164	25 × 40	1000
3FKFB210166	25 × 42	1000
3FKFB210168	25 × 48	500
3FKFB210170	27 × 45	500
3FKFB210172	30 × 42	500
3FKFB210174	30 × 57	500
3FKFB210176	32 × 50	500
3FKFB210178	36 × 58	500
3FKFB210180	38 × 50	500
3FKFB210182	42 × 50	500
3FKFB210184	42 × 61	500



Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin[®], z fałdą

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607



Przezroczyste torebki stericlin[®] spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin[®] z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.



Nr art.	Wielkość w cm (szerokość × fałd × długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FKSB220102	10 × 5 × 30	2000
3FKSB220104	10 × 5 × 40	2000
3FKSB220106	15 × 5 × 28	1000
3FKSB220108	15 × 5 × 40	1000
3FKSB220110	20 × 5 × 40	1000
3FKSB220112	20 × 5 × 48	500
3FKSB220114	25 × 6,5 × 48	500
3FKSB220116	30 × 6,5 × 61	500
3FKSB220118	41 × 6,5 × 61	500



Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, płaskie

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607

Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.



Nr art.	Szerokość w cm	Długość	Zawartość kartonu (rolki)
3FKFS230102	5	200 m	6
3FKFS230104	7,5	200 m	4
3FKFS230106	10	200 m	3
3FKFS230108	12,5	200 m	2
3FKFS230110	15	200 m	2
3FKFS230112	20	200 m	2
3FKFS230114	25	200 m	2
3FKFS230116	30	200 m	1
3FKFS230117	35	200 m	1
3FKFS230118	38	200 m	1
3FKFS230119	40	200 m	1
3FKFS230120	42	200 m	1

Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, z fałdą

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607



Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.



Nr art.	Wielkość w cm (szerokość x fałda)	Długość	Zawartość kartonu (rolki)
3FKSS230204	7,5 × 2,5	100 m	4
3FKSS230206	10 × 5	100 m	3
3FKSS230210	15 × 5	100 m	2
3FKSS230212	20 × 5	100 m	2
3FKSS230214	25 × 6,5	100 m	2
3FKSS230216	30 × 6,5	100 m	1
3FKSS230218	38 × 8,0	100 m	1
3FKSS230220	42 × 8,0	100 m	1



Przezroczyste opakowania włókninowo-foliowe stericlin®

Idealne do dużych przedmiotów – duża przepuszczalność pary – DIN EN ISO 11607

Te przezroczyste opakowania stericlin® składają się z włókniny o gramaturze 56 g/m² połączonej przez zgrzanie z folią zespoloną. Trzy wskaźniki procesu sterylizacji STEAM (para wodna), EO (tlenkiem

etylenu) i FORM (formaldehydem) są nadrukowane poza przestrzenią przeznaczoną do pakowania. Nasz system łączy w sobie zalety i właściwości miękkich opakowań (z włóknin) z łatwością użytkowania

opakowań przezroczystych. Przy tym wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej umożliwiają zastosowanie tych opakowań do dużych przedmiotów. Mechaniczna wytrzymałość pozwala na

pakowanie nawet ciężkich instrumentów. Przezroczyste opakowania stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-5.



Nr art.	Wykonanie	Wielkość (szerokość × długość)	Zawartość kartonu
3FKFB240105	Torebka	27 × 36 cm	500 szt.
3FKFB240110	Torebka	32 × 45 cm	500 szt.
3FKFB240115	Torebka	40 × 52 cm	250 szt.
3FKFB240120	Torebka	50 × 60 cm	250 szt.
3FKFB240125	Torebka	57 × 72 cm	250 szt.
3FKFS240212	Rękaw	20 cm/100 m	2 rolki
3FKFS240220	Rękaw	42 cm/100 m	1 rolka

Przezroczyste opakowania stericlin® z włókniny DuPont™ Tyvek® i folii

Idealne do instrumentów termolabilnych – otwierania przez odklejanie bez ryzyka pylenia – DIN EN ISO 11607



Jakość przezroczystych opakowań stericlin® z włókniny Tyvek® i folii zespolonej jest w decydującym stopniu uzależniona od doboru materiału. Dlatego używamy wyłącznie najmocniejszego w medycynie papieru Tyvek®: Typu 1073 B o gramaturze 75 g/m². Nasz system bariery sterylnej wyróżniają znakomite właściwości barierowe przed zarazkami, bakteriami i wilgocią oraz ekstremalnie wysoka odporność na przebicie i rozdarcie, jak również bezpyłowe otwieranie. Tyvek® i stosowana folia zespolona nadają się optymalnie do sterylizacji plazmą niskotemperaturową (VH2O2), gazem (EO), formaldehydem (FORM) oraz do sterylizacji radiacyjnej. Dwa wskaźniki procesu sterylizacji VH2O2 (PLAZMA) i EO (tlenek etylenu) są nadrukowane poza przestrzenią przeznaczoną do pakowania. Dla sterylizacji gazowej system bariery sterylnej stericlin® jest najlepszym wyborem, ponieważ Tyvek® i folia zespolona praktycznie nie absorbują toksycznych gazów a zawartość resztkowa leży znacznie poniżej dozwolonych wartości granicznych. Przezroczyste opakowania stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-9.

W przypadku dodatkowych wariantów (kombinacje materiałów/rozmiary) prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży pod adresem contact@stericlin.com.

Nr art.	Wykonanie	Wielkość (szerokość × długość)	Zawartość kartonu
3FKFB250105	Torebka	7,5 × 20 cm	1000 szt.
3FKFB250110	Torebka	10 × 27 cm	500 szt.
3FKFB250115	Torebka	15 × 30 cm	500 szt.
3FKFB250120	Torebka	20 × 40 cm	500 szt.
3FKFB250125	Torebka	25 × 48 cm	500 szt.
3FKFS250204	Rękaw	7,5 cm/100 m	2 rolki
3FKFS250206	Rękaw	10 cm/100 m	2 rolki
3FKFS250210	Rękaw	15 cm/100 m	1 rolka
3FKFS250212	Rękaw	20 cm/100 m	1 rolka
3FKFS250214	Rękaw	25 cm/100 m	1 rolka
3FKFS250216	Rękaw	30 cm/100 m	1 rolka
3FKFS250218	Rękaw	38 cm/100 m	1 rolka
3FKFS250222	Rękaw	50 cm/100 m	1 rolka



steriCLIN®

Opakowania w arkuszach



Ekonomiczność miękkich opakowań przekona również Państwa!

Zalety opakowań w arkuszach stericlin®, takie jak ekonomiczność i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce magazynowe, mówią same za siebie. Opakowania w arkuszach ułatwiają usuwanie powietrza, penetrację pary i suszenie po sterylizacji parowej oraz są doskonałym systemem barier sterylnych również w innych metodach sterylizacji. Oferujemy Państwu najróżniejsze wersje opakowań miękkich, w wielu formatach, kolorach i kombinacjach – odpowiednio do Państwa wymagań i metod sterylizacji. Opakowania w arkuszach stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2.

- Arkusz podwójny SMS/SMS
- Arkusz podwójny SMS/włóknina
- SMS/SMS interleaved
- Opakowania w arkuszach SMS/włóknina interleaved
- Opakowania w arkuszach włóknina/włóknina interleaved
- Opakowania w arkuszach z polipropylenu (SMS)
- Opakowania w arkuszach z włókniny
- Papier krepowy w arkuszach

Arkusz podwójny SMS/SMS stericlin®

Innowacyjne opakowanie arkuszowe – DIN EN ISO 11607



Arkusz podwójny SMMMS/SMMMS

Innowacyjny arkusz zespolony stericlin® spełnia wymagania norm DIN EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączy ze sobą dwa różne, wykonane z polipropylenu, opakowania w arkuszach: arkusz niebieskiej włókniny polipropylenowej SMMS 60g i arkusz zielonej polipropylenowej włókniny SSMMS 47g z włókien tworzywa sztucznego, które zostały ze sobą zgrzane na dwóch bokach. Uszkodzenia opakowania można łatwiej rozpoznać dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i zewnętrznego (niebieskiego).

Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Sterilisation Products (ASP).


Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FDOP381206	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	60 × 60	125
3FDOP381208	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	75 × 75	75
3FDOP381212	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	90 × 90	50
3FDOP381214	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	100 × 100	50
3FDOP381218	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	120 × 120	50
3FDOP381226	SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g	140 × 140	25
3FDOP383206	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	60 × 60	125
3FDOP383208	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	75 × 75	50
3FDOP383212	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	90 × 90	50
3FDOP383214	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	100 × 100	50
3FDOP383218	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	120 × 120	50
3FDOP383226	SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g	140 × 140	25
3FDOP385206	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	60 × 60	125
3FDOP385208	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	75 × 75	50
3FDOP385212	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	90 × 90	50
3FDOP385214	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	100 × 100	50
3FDOP385218	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	120 × 120	25
3FDOP385226	SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g	140 × 140	25

Arkusz podwójny SMS/włóknina stericlin®


Innowacyjne opakowanie arkuszowe – DIN EN ISO 11607

Innowacyjny arkusz zespolony stericlin® spełnia wymagania norm DIN EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączy ze sobą dwa różne, wykonane z polipropylenu, opakowania w arkuszach: arkusz niebieskiej włókniny polipropylenowej SMS z włókien ze sztucznego tworzywa i arkusz zielonej włókniny z włókien celulozowych i z tworzywa sztucznego, które zostały ze sobą zgrzane na dwóch bokach. Pozwala to na perfekcyjne wykorzystanie zalet obu tych materiałów.

Ekstremalna stabilność niebieskiego materiału SMS zostaje połączona z właściwościami mieszanych włókien zielonej włókniny, co sprzyja całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji. Ponadto, dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i zewnętrznego (niebieskiego), można łatwiej rozpoznać uszkodzenia opakowania.

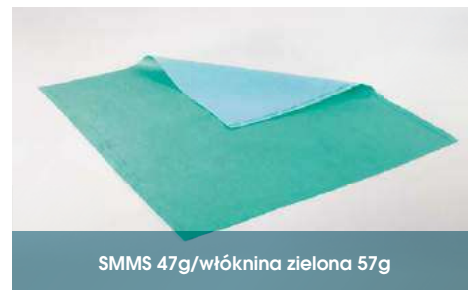

SMMS 47g/włóknina zielona 57g

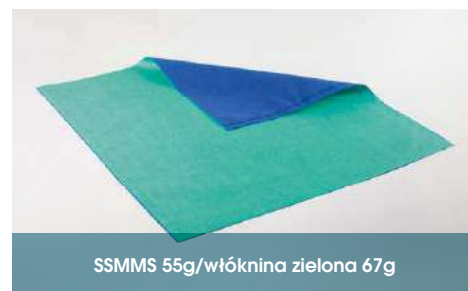


SSMMS 55g/włóknina zielona 67g

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FDOP372208	SMMS 47g/włóknina zielona 57g	75 × 75	120
3FDOP372212	SMMS 47g/włóknina zielona 57g	90 × 90	100
3FDOP372214	SMMS 47g/włóknina zielona 57g	100 × 100	100
3FDOP372218	SMMS 47g/włóknina zielona 57g	120 × 120	72
3FDOP372226	SMMS 47g/włóknina zielona 57g	140 × 140	52
3FDOP373208	SSMMS 55g/włóknina zielona 67g	75 × 75	100
3FDOP373212	SSMMS 55g/włóknina zielona 67g	90 × 90	100
3FDOP373214	SSMMS 55g/włóknina zielona 67g	100 × 100	80
3FDOP373218	SSMMS 55g/włóknina zielona 67g	120 × 120	60
3FDOP373226	SSMMS 55g/włóknina zielona 67g	140 × 140	40

Opakowania w arkuszach naprzemiennie pakowane SMS/SMS

Włóknina polipropylenowa (SMS) 2 kolory – DIN EN ISO 11607

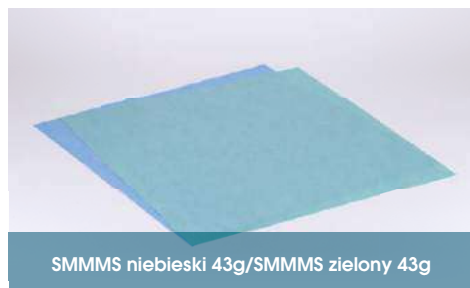

Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Przeznaczone są do zastosowania w połączeniu dla wszystkich możliwych metod sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu oraz plazmy.

Opakowanie arkuszowe naprzemiennie pakowane stericlin® SMS/SMS jest fabrycznie spakowane w dwa następujące po sobie kolory: niebieski i zielony, co powoduje wygodę użytkowania. Różne kolory od strony zewnętrznej i wewnętrznej powodują łatwą identyfikację uszkodzonego opakowania.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FITL381106	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	60 × 60	150
3FITL381108	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	75 × 75	150
3FITL381112	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	90 × 90	150
3FITL381114	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	100 × 100	150
3FITL381118	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	120 × 120	100
3FITL381126	SMMMS niebieski 43g/ SMMMS zielony 43g	140 × 140	100


Opakowania w arkuszach SMS/włóknina interleaved stericlin®

Dwa rodzaje włókniny i wiele zalet – DIN EN ISO 11607

Opakowania w arkuszach stericlin® interleaved spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączą ze sobą dwa różne materiały: arkusz niebieskiej włókniny polipropylenowej SMS z włókien ze sztucznego tworzywa i arkusz zielonej włókniny z włókien celulozowych i z tworzywa sztucznego, które naprzemiennie układano w stosy. Pozwala to na perfekcyjne wykorzystanie zalet obu tych materiałów.

Ekstremalna stabilność niebieskiego materiału SMS zostaje połączona z właściwościami mieszanych włókien zielonej włókniny, co sprzyja całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji. Ponadto, dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i zewnętrznego (niebieskiego) można łatwiej rozpoznać uszkodzenia opakowania.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.

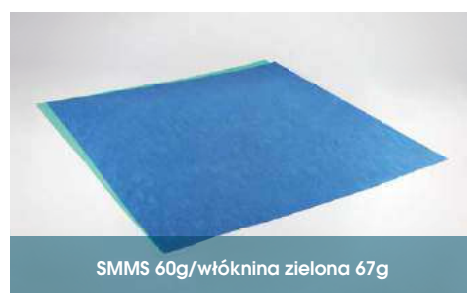

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FITL370108	SSMMS 43g/włóknina zielona 57g	75 × 75	200
3FITL370114	SSMMS 43g/włóknina zielona 57g	100 × 100	200
3FITL370118	SSMMS 43g/włóknina zielona 57g	120 × 120	120
3FITL370126	SSMMS 43g/włóknina zielona 57g	140 × 140	120
3FITL375108	SMMS 60g/włóknina zielona 67g	75 × 75	200
3FITL375114	SMMS 60g/włóknina zielona 67g	100 × 100	160
3FITL375118	SMMS 60g/włóknina zielona 67g	120 × 120	120
3FITL375126	SMMS 60g/włóknina zielona 67g	140 × 140	80

Opakowania w arkuszach włóknina/włóknina interleaved stericlin®

Włóknina w dwóch kolorach – DIN EN ISO 11607



Włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g

Włóknina stericlin® o gramaturze 52g jest materiałem charakteryzującym się bardzo dobrą zdolnością drapowania przy jednoczesnej bardzo dużej stabilności mechanicznej. Spełnia ona wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2 i nadaje się do pakowania wyrobów medycznych jak siła instrumentowe lub bielizna. Mieszane włókna włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjają całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji.

Pakowanie w arkusze interleaved stericlin® oferuje wiele zalet. Uszkodzenia opakowania można łatwiej rozpoznać dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego i zewnętrznego. Ponieważ niebieskie i zielone arkusze są ułożone na stosach naprzemiennie, nie trzeba zestawiać ze sobą arkuszy wyjmowanych z różnych kartonów.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FITL340108	Włóknina niebieska 52g/ włóknina zielona 52g	75 × 75	200
3FITL340112	Włóknina niebieska 52g/ włóknina zielona 52g	90 × 90	200
3FITL340114	Włóknina niebieska 52g/ włóknina zielona 52g	100 × 100	200
3FITL340118	Włóknina niebieska 52g/ włóknina zielona 52g	120 × 120	100
3FITL340120	Włóknina niebieska 52g/ włóknina zielona 52g	120 × 140	100


Opakowania w arkuszach stericlin® z polipropylen (SMS)

Do każdego zastosowania odpowiednia gramatura – DIN EN ISO 11607


Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa. Im większa gramatura włókniny, tym odporniejsze jest wykonane z niej miękkie opakowanie. Wszystkie opakowania w arkuszach stericlin® wykonane z polipropylenu (SMS) spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2.

Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków.


Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z SMS, włókniny i papieru krepowego niezależnie od koloru i formatu. Przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

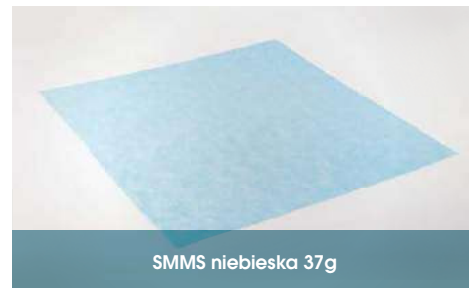

SMMS niebieska 37g

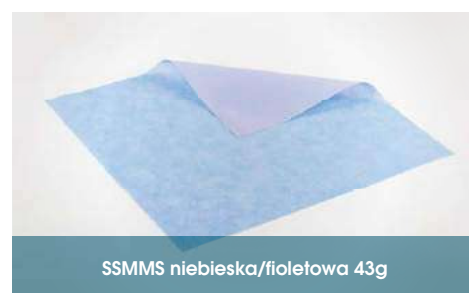

SSMMS niebieska/fioletowa 43g

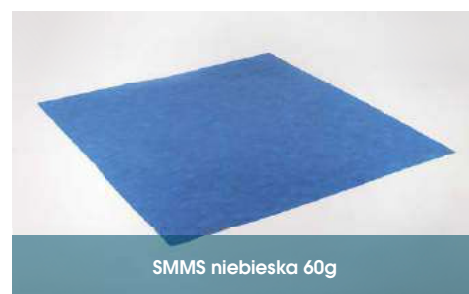

SMMS niebieska 60g

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FSMS355106	SMMS niebieska 37g	60 × 60	480
3FSMS355108	SMMS niebieska 37g	75 × 75	200
3FSMS355112	SMMS niebieska 37g	90 × 90	200
3FSMS355114	SMMS niebieska 37g	100 × 100	200
3FSMS355118	SMMS niebieska 37g	120 × 120	120
3FSMS355120	SMMS niebieska 37g	120 × 140	120
3FSMS355126	SMMS niebieska 37g	140 × 140	120
3FSMS355127	SMMS niebieska 37g	140 × 190	80
3FSMS360104	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	50 × 50	500
3FSMS360108	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	75 × 75	200
3FSMS360112	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	90 × 90	200
3FSMS360114	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	100 × 100	200
3FSMS360118	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	120 × 120	120
3FSMS360120	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	120 × 140	120
3FSMS360126	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	140 × 140	120
3FSMS360128	SSMMS niebieska/fioletowa 43g	150 × 190	48
3FSMS365114	SMMS niebieska 60g	100 × 100	104
3FSMS365118	SMMS niebieska 60g	120 × 120	96
3FSMS365126	SMMS niebieska 60g	140 × 140	80

Opakowania w arkuszach stericlin® z włókniny

Połączenie włókien celulozowych i włókien sztucznych – DIN EN ISO 11607



Włóknina niebieska 52g



Włóknina zielona 52g



Włóknina niebieska 59g

Opakowania w arkuszach stericlin® z włókniny charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością drapowania przy jednoczesnej bardzo dużej stabilności mechanicznej. Spełniają one wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2 i nadają się do pakowania wyrobów medycznych jak siła instrumentowe lub bielizna. Im większa gramatura włókniny, tym odporniejsze jest wykonane z niej miękkie opakowanie.

Mieszane włókna włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjają całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji.

Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z SMS, włókniny i papieru krepowego – niezależnie od koloru i formatu. Należy przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FVLI330104	Włóknina niebieska 52g	50 × 50	500
3FVLI330106	Włóknina niebieska 52g	60 × 60	500
3FVLI330108	Włóknina niebieska 52g	75 × 75	200
3FVLI330112	Włóknina niebieska 52g	90 × 90	200
3FVLI330114	Włóknina niebieska 52g	100 × 100	200
3FVLI330116	Włóknina niebieska 52g	100 × 140	100
3FVLI330118	Włóknina niebieska 52g	120 × 120	100
3FVLI330120	Włóknina niebieska 52g	120 × 140	100
3FVLI330124	Włóknina niebieska 52g	130 × 150	100
3FVLI330126	Włóknina niebieska 52g	140 × 140	100
3FVLI330128	Włóknina niebieska 52g	150 × 190	100
3FVLI330204	Włóknina zielona 52g	50 × 50	500
3FVLI330206	Włóknina zielona 52g	60 × 60	500
3FVLI330208	Włóknina zielona 52g	75 × 75	200
3FVLI330212	Włóknina zielona 52g	90 × 90	200
3FVLI330214	Włóknina zielona 52g	100 × 100	200
3FVLI330218	Włóknina zielona 52g	120 × 120	100
3FVLI330222	Włóknina zielona 52g	130 × 130	100
3FVLI350106	Włóknina niebieska 59g	60 × 60	500
3FVLI350108	Włóknina niebieska 59g	75 × 75	200
3FVLI350112	Włóknina niebieska 59g	90 × 90	200
3FVLI350114	Włóknina niebieska 59g	100 × 100	200
3FVLI350118	Włóknina niebieska 59g	120 × 120	100
3FVLI350126	Włóknina niebieska 59g	140 × 140	100

Papier krepowy stericlin® w arkuszach

Wyprodukowanego w 100 % z celulozy – DIN EN ISO 11607

Papier krepowy stericlin® jest najbardziej ekonomicznym opakowaniem arkuszowym i składa się w 100 % z papieru medycznego wyprodukowanego z celulozy. Opakowania arkuszowe nadają się szczególnie do pakowania lżejszych instrumentów i zestawów. Materiał spełnia wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2.

Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z SMS, włókniny i papieru krepowego - niezależnie od koloru i formatu. Należy przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.



Papier krepowy biały



Papier krepowy zielona

Nr art.	Materiał	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FPAP310102	Papier krepowy biały	40 × 40	1500
3FPAP310104	Papier krepowy biały	50 × 50	750
3FPAP310106	Papier krepowy biały	60 × 60	750
3FPAP310108	Papier krepowy biały	75 × 75	350
3FPAP310112	Papier krepowy biały	90 × 90	250
3FPAP310114	Papier krepowy biały	100 × 100	250
3FPAP310118	Papier krepowy biały	120 × 120	125
3FPAP310202	Papier krepowy zielona	40 × 40	1500
3FPAP310204	Papier krepowy zielona	50 × 50	750
3FPAP310206	Papier krepowy zielona	60 × 60	750
3FPAP310208	Papier krepowy zielona	75 × 75	350
3FPAP310212	Papier krepowy zielona	90 × 90	250
3FPAP310214	Papier krepowy zielona	100 × 100	250
3FPAP310218	Papier krepowy zielona	120 × 120	125

steriCLIN®



Akcesoria centralna sterylizatornia



Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji

Niezwykle ważne jest zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego i kompletnego procesu dekontaminacji wyrobów medycznych oraz walidacja i dokumentowanie sekwencji procesu. Ewentualne błędy lub awarie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Akcesoria CSSD stericlin® umożliwiają niezrównane zapewnienie jakości: najwyższej klasy produkty od jednego dostawcy, w tym doskonały serwis.

- Taśmy samoprzylepne
- Akcesoria do koszy sitowych
- Akcesoria do kontenerów
- Opakowanie ochronne
- Opaski kablowe
- Kapturki ochronne na narzędzia
- Testy szczelności
- Chusteczki z mikrofibry
- Worki na odpady z paskiem samoprzylepnym
- Karton do utylizacji

Taśmy samoprzylepne stericlin[®]

Z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku

Przy pomocy samoprzylepnych taśm stericlin[®] można bezpiecznie zamykać wykonane z papieru krepowego, włókniny i polipropylenu (SMS) opakowania w arkuszach, nie tracąc sterylności. Są one dostępne z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku.

Nr art.	Opis	Wielkość (szerokość x długość)	Zawartość kartonu	
3FKLB410102/ 3FKLB410302	beżowa, ze wskaźnikiem STEAM	19 mm/50 m	48 rolki	
3FKLB410104/ 3FKLB410304	beżowa, ze wskaźnikiem STEAM	25 mm/50 m	36 rolki	
3FKLB410106	niebieska, ze wskaźnikiem STEAM	19 mm/50 m	48 rolki	
3FKLB410108	beżowa, ze wskaźnikiem EO	19 mm/50 m	48 rolki	
3FKLB410110	biała, ze wskaźnikiem VH2O2 (PLAZMA)	25 mm/25 m	12 rolki	



Taśmy samoprzylepne stericlin® - Z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku

	Nr art.	Opis	Wielkość (szerokość × długość)	Zawartość kartonu
	3FKLB410112	biała, ze wskaźnikiem DRY-HEAT (do sterylizacji gorącym, suchym powietrzem)	19 mm/50 m	48 rolki
	3FKLB410202/ 3FKLB410402	beżowa, bez wskaźnika	19 mm/50 m	48 rolki
	3FKLB410204/ 3FKLB410404	beżowa, bez wskaźnika	25 mm/50 m	36 rolki
	3FKLB410206/ 3FKLB410406	beżowa, bez wskaźnika	50 mm/50 m	24 rolki
	3FKLB410208	niebieska, bez wskaźnika	19 mm/50 m	48 rolki

Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych

Akcesoria do taśm samoprzylepnych stericlin®



Nasze dyspensery mogą być stosowane do wszystkich taśm samoprzylepnych stericlin®. Zapewniają wydajną, szybką i łatwą pracę.

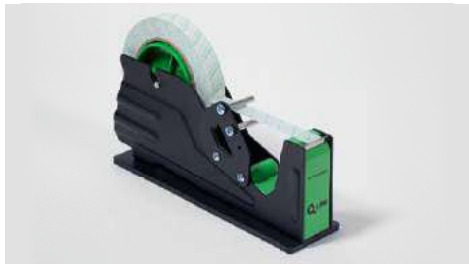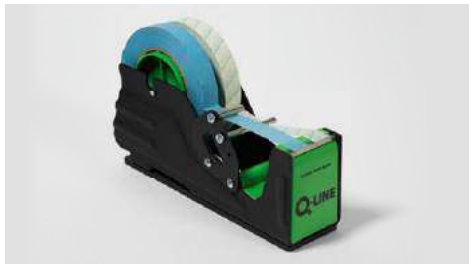Nr art.	Opis	Zawartość kartonu	
3FSZB410302	Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych (z metalu)	1 szt.	
3FSZB410304	Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych (z metalu)	1 szt.	

Chłonne maty absorpcyjne stericlin®

Niezawodna ochrona miękkich opakowań

Stabilne i niezawodne: chłonne maty absorpcyjne stericlin® do koszy do miękkich opakowań z bardzo mocnej, chłonnej krepy zapobiegają uszkodzeniom miękkich opakowań podczas sterylizacji, transportu i magazynowania. Dodatkowo przyczyniają się do poprawy procesu schnięcia.

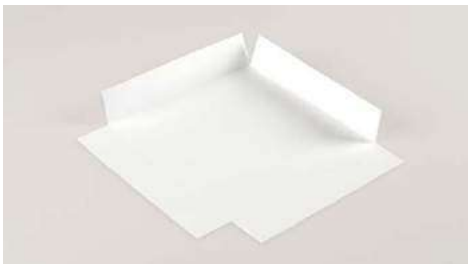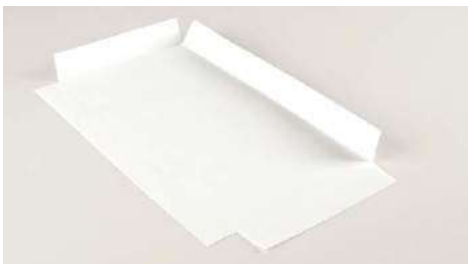	Nr art.	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
	3FTSZ420102	25 x 25 *), Wymiar zewnętrzny 35 x 35	500
	3FTSZ420104	48 x 25 *), Wymiar zewnętrzny 58 x 35	500
	3FTSZ420110	58 x 35	500

*) Wkłady o wymiarach 25 x 25 cm i 48 x 25 cm są już uformowane – z wykrojonymi rogami i wstępnie sfałdowanym nadдатkiem (po 5 cm na stronę).

Ochrona narożników do koszy sitowych stericlin®

Niezawodna ochrona miękkich opakowań

Stabilność i niezawodność: ochrona narożników stericlin® zapobiega uszkodzeniom systemu barier sterylnych, które mogą zostać spowodowane przez ostre krawędzie i nóżki ciężkich lub wypożyczonych sit. Ochrona narożników optymalnie zabezpiecza miękkie opakowania podczas sterylizacji, transportu i przechowywania.

Silikonowe osłony narożników można mocować za pomocą naszych silikonowych zatyczek (str. 54) lub silikonowych opasek zaciskowych (str. 68).



Nr art.	Opis	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FTSZ422105	Papierowe narożniki do sit	10 × 10 × 5	1200
NEW 3FTSZ422202	Narożniki Stericlin® wykonane z silikonu, odporne na temperaturę do 200°C, kolor: zielony, przystosowane do trwałego mocowania do perforowanej płyty lub koszy z siatki drucianej za pomocą naszych zatyczek silikonowych	7,5 × 7,5 × 3	4

Zatyczki silikonowe

Do mocowania etykiet koszykowych i ochraniaczy narożników



Nasze silikonowe zatyczki stericlin® zapewniają elastyczność mocowania.

Zatyczki są łatwe do zakładania i wyjmowania oraz zapewniają dobry przepływ środka czyszczącego.

Oferujemy różne kolory w celu zróżnicowania np. działów czy celów.

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FEDS843302	Kolor: niebieski, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)	100
3FEDS843304	Kolor: żółty, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)	100
3FEDS843308	Kolor: przezroczysty, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)	100

Etykieta do sit stericlin®

Proste oznaczanie sit na narzędzia

Do szybkiej identyfikacji, sortowania i kodowania sit na narzędzia. Ze względu na właściwości materiału etykiety do sit stericlin® nadają się do całego cyklu przetwarzania i można na nich pisać flamastrami lub przyklejać na nie inne etykiety. Różne kolory i nadruki zapewniają niezbędną elastyczność umożliwiającą przekazywanie informacji między działami. Na życzenie istnieje możliwość wykonania spersonalizowanych kombinacji.

Kombinacje niestandardowe mogą być również produkowane na życzenie klienta.


Nr art.	Wielkość (mm)	Kolor	Nadruk	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FTSZ430152	236 × 50	biały	gładki	-	1000
3FTSZ430154	236 × 50	pomarańczowy	gładki	-	1000
3FTSZ430156	236 × 50	niebieski	gładki	-	1000
3FTSZ430158	236 × 50	zielony	gładki	-	1000
3FTSZ430160	236 × 50	żółty	gładki	-	1000
3FTSZ430162	236 × 50	czerwony	gładki	-	1000
3FTSZ430172	160 × 35	biały	gładki	-	1000
3FTSZ430174	160 × 35	pomarańczowy	gładki	-	1000
3FTSZ430176	160 × 35	niebieski	gładki	-	1000
3FTSZ430178	160 × 35	zielony	gładki	-	1000
3FTSZ430180	160 × 35	żółty	gładki	-	1000
3FTSZ430182	160 × 35	czerwony	gładki	-	1000
3FTSZ430302	100 × 110	biały	gładki	z zamkiem zatrzaskowym	250
3FTSZ430304	210 × 110	biały	gładki	-	1000




Warianty kolorystyczne etykiet na duże tacki



Warianty kolorystyczne etykiet na małe tacki

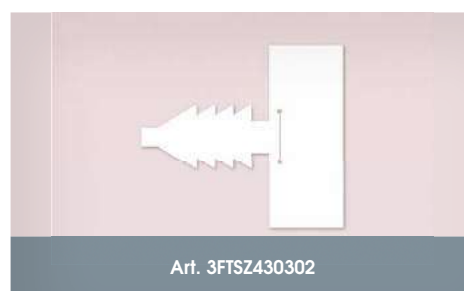

Art. 3FTSZ430302

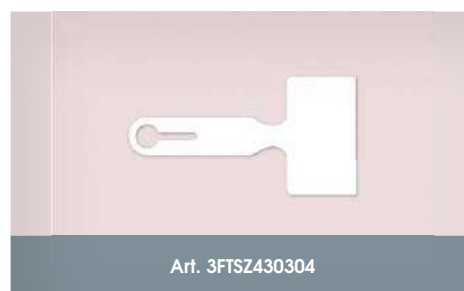

Art. 3FTSZ430304


Wkłady absorpcyjne stericlin®

Zapobiegają wilgoci w koszach do instrumentów



Wkłady absorpcyjne stericlin® z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować.

Prosimy pamiętać: Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej.

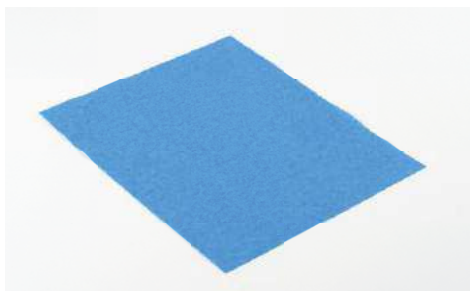


Nr art.	Wielkość w cm	Zawartość kartonu (szt.)
3FCZB440108	25 × 30	1000
3FCZB440110	30 × 50	1000

Etykiety do kontenerów stericlin®

Różne wykonania – dla wszystkich typowych systemów kontenerowych

Łatwe znakowanie i identyfikacja! Etykiety do kontenerów stericlin® są samoprzylepne i posiadają wszystkie istotne pola opisowe. W ten sposób gwarantują one szybką identyfikację każdego kontenera.

Możliwe są indywidualne wymiary i realizacja specjalnych życzeń zamawiającego. Prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.

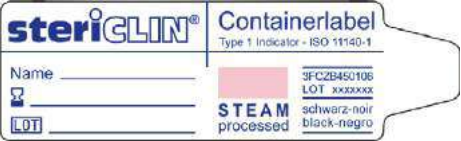Nr art.	Typ kontenera	Wielkość (szerokość x wysokość)	Zawartość kartonu (szt.)	
3FCZB450102	Aesculap	75 x 35 mm (z języczkiem)	1000	
3FCZB450104	Aesculap	67 x 39 mm (z języczkiem)	1000	
3FCZB450106	Aesculap	60 x 18 mm (z języczkiem)	1000	
3FCZB450108	Wagner	59 x 40 mm	1000	

Tabliczki identyfikacyjne z aluminium

Do identyfikacji, przyporządkowania i przekazywania informacji

NEW



Aluminiowe tabliczki identyfikacyjne mogą być stosowane m.in. w szufladach różnych typów pojemników i służą również do przekazywania informacji poprzez przyporządkowanie kolorów.

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor	Zawartość kartonu (szt.)
3FEDS843202	Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	50 × 18	niebieski	25
3FEDS843204	Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	50 × 18	zielony	25
3FEDS843206	Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	50 × 18	czerwony	25
3FEDS843208	Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	50 × 18	żółty	25
3FEDS843210	Tabliczki identyfikacyjne z aluminium	50 × 18	naturalny	25

Zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin® Solo / Duo i Multi


Bezpieczna plomba do ochrony przed manipulacją

NEW

Zgrzewy z tworzywa sztucznego stericlin® wykonane są z odpornego na sterylizację polipropylenu i są dostępne w różnych kolorach. Prosty ruchem ręki można bezpiecznie zaplombować wszystkie popularne systemy kontenerów z uchwytami zamykającymi.

Do kontenerów Aesculap szczególnie odpowiednie są zgrzewy stericlin® Solo - do kontenerów Wagner rekomendowane są zgrzewy stericlin® Duo, a dla różnych innych wariantów zgrzewy stericlin® Multi. Specjalna konstrukcja wszystkich przykładów wykonania zgrzewów z tworzywa sztucznego stericlin® z dużym kątem otwarcia umożliwia proste umieszczanie na kontenerze i zamykanie przez zahaczenie.

Otwieranie kontenera jest możliwe tylko poprzez zerwanie zgrzewu. W ten sposób zapewnione jest, że kontener do sterylizacji po jego dostarczeniu na miejsce zastosowania nie podlegał manipulacjom. Otwieranie zgrzewu z tworzywa sztucznego stericlin® następuje poprzez zagięcie w zadanym miejscu pęknięcia przy pomocy lekkiego obrotu płyty do chwytania. Następnie można bez wysiłku zerwać zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin®.

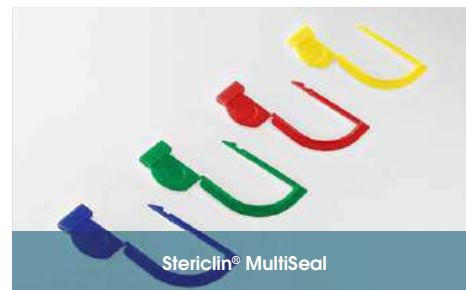

Art. 3FCZB460304



Art. nr 3FCZB460418 ze wskaźnikiem STEAM

Nr art.	Opis	Kompatybilność kontenera	Kolor	Wskaźnik	Zawartość kartonu (szt.)
3FCZB460302	MultiSeal	Różne	ciemnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460303	MultiSeal	Różne	żółty	Nie	1000
3FCZB460304	MultiSeal	Różne	czerwony	Nie	1000
3FCZB460306	MultiSeal	Różne	zielony	Nie	1000
3FCZB460308	MultiSeal	Różne	biały	Nie	1000
3FCZB460310	MultiSeal	Różne	ciemnoniebieski	STEAM	1000
3FCZB460312	MultiSeal	Różne	czerwony	STEAM	1000
3FCZB460313	MultiSeal	Różne	żółty	STEAM	1000
3FCZB460314	MultiSeal	Różne	zielony	STEAM	1000
3FCZB460316	MultiSeal	Różne	biały	STEAM	1000
3FCZB460402	SoloSeal	Aesculap	ciemnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460404	SoloSeal	Aesculap	zielony	Nie	1000
3FCZB460406	SoloSeal	Aesculap	biały	Nie	1000
3FCZB460408	SoloSeal	Aesculap	czerwony	Nie	1000
3FCZB460410	SoloSeal	Aesculap	żółty	Nie	1000
3FCZB460412	SoloSeal	Aesculap	pomarańczowy	Nie	1000
3FCZB460414	SoloSeal	Aesculap	fioletowy	Nie	1000
3FCZB460416	SoloSeal	Aesculap	jasnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460418	SoloSeal	Aesculap	ciemnoniebieski	STEAM	1000
3FCZB460420	SoloSeal	Aesculap	zielony	STEAM	1000
3FCZB460422	SoloSeal	Aesculap	biały	STEAM	1000
3FCZB460424	SoloSeal	Aesculap	czerwony	STEAM	1000
3FCZB460426	SoloSeal	Aesculap	żółty	STEAM	1000
3FCZB460428	SoloSeal	Aesculap	pomarańczowy	STEAM	1000
3FCZB460430	SoloSeal	Aesculap	fioletowy	STEAM	1000
3FCZB460432	SoloSeal	Aesculap	jasnoniebieski	STEAM	1000



Zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin® Solo / Duo i Multi

Nr art.	Opis	Kompatybilność kontenera	Kolor	Wskaźnik	Zawartość kartonu (szt.)
3FCZB460452	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Czerwony	Nie	1000
3FCZB460454	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Ciemnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460456	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Zielony	Nie	1000
3FCZB460458	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Żółty	Nie	1000
3FCZB460460	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Czerwony	STEAM	1000
3FCZB460462	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Ciemnoniebieski	STEAM	1000
3FCZB460464	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Zielony	STEAM	1000
3FCZB460466	DuoSeal	Aesculap / Wagner	Żółty	STEAM	1000

Plomby specjalne i plomby zabezpieczające do różnych zastosowań

Bezpieczne plombowanie chroniące przed manipulacją

NEW

Oryginalne jednorazowe plomby z tworzywa KLS Martin microStop® i MiniSet są po prostu wkładane od góry w odpowiednie pojemniki i same się blokują.


Plomby zabezpieczające są stosowane do oznaczania i zabezpieczania szerokiej gamy towarów transportowych. Kontenery, wózki, skrzynie, wózki transportowe i wiele innych są w ten sposób zabezpieczone przed manipulacją. Numeracja sekwencyjna zapewnia identyfikowalność i umożliwia kompletną dokumentację. Dzięki praktycznej pomocy do zdejmowania, plombę można otworzyć bez użycia narzędzi.



Art. 3FCZB460484



Art. 3FCZB460486

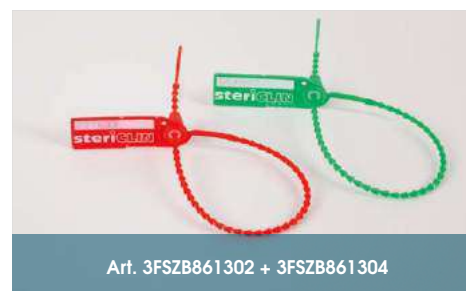




Art. 3FSZB861302 + 3FSZB861304

Nr art.	Opis	Kompatybilność kontenera	Kolor	Wskaźnik	Zawartość kartonu (szt.)
3FCZB460482	KLS Martin miniset plomby	MiniSet containers	czzerwony	STEAM	1000
3FCZB460484	KLS Martin multi plomby	microStop® containers	czzerwony	STEAM	1000
3FCZB460486	KLS Martin multi plomby	microStop® containers	czzerwony	nie	1000
3FSZB861302	stericlin® plomba zabezpieczająca z polipropylenu, Długość: 230 mm / z pomocą do wyjmowania / sekwencyjna numeracja	Różne	czzerwony	nie	100
3FSZB861304	stericlin® plomba zabezpieczająca z polipropylenu, Długość: 230 mm / z pomocą do wyjmowania / sekwencyjna numeracja	Różne	zielony	nie	100

Papierowe plomby do kontenerów stericlin®.

Bezpieczna ochrona przed manipulacją

Wszystkie typowe systemy kontenerów z uchwytyami do zamykania można pewnie i bezpiecznie plombować przy użyciu plomb do kontenerów stericlin®. Kontener można otworzyć dopiero po zniszczeniu plomby.

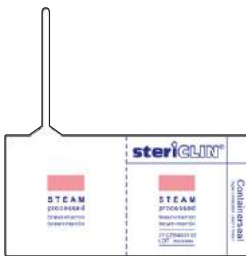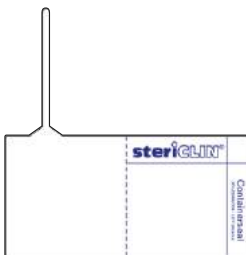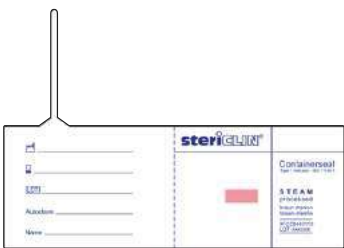	Nr art.	Opis	Wielkość (width x height)	Zawartość kartonu (szt.)
	3FCZB460102	Ze wskaźnikiem STEAM, bez pola dokumentacyjnego	80 x 40 mm (składany: 40 x 40 mm) Pasek: 2,5 x 70 mm	500
	3FCZB460104	Bez wskaźnika i pola dokumentacyjnego	80 x 40 mm (składany: 40 x 40 mm) Pasek: 2,5 x 70 mm	500
	3FCZB460110	Ze wskaźnikiem STEAM i polem dokumentacyjnym	125 x 45 mm (składany: 62,5 x 45 mm) Pasek: 2,5 x 70 mm	500

Filtry do kontenerów stericlin®

Niezawodna bariera przeciw zarazkom i bakteriom – do wszystkich typowych systemów kontenerowych

Filtry do kontenerów stericlin® tworzą niezawodną barierę przeciwko zarazkom i bakteriom. Zastosowane materiały spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11607. Do jednorazowego użytku, gwarantują powtarzalną jakość. Kolejną zaletą filtrów do kontenerów jest ich opłacalność.

Możliwe są indywidualne wymiary i realizacja specjalnych życzeń zamawiającego. Prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.

Nr art.	Typ kontenera	Opis	Zawartość kartonu (szt.)	
3FCZB470102	Aesculap	Prostokątne, z papieru, z nadrukiem i wskaźnikiem STEAM, Wielkość: 230 × 230 mm, rogi ścięte	500	
3FCZB470104	Aesculap	Prostokątne, z papieru, z nadrukiem i wskaźnikiem STEAM, Wielkość: 171 × 232 mm, rogi ścięte	1000	
3FCZB470106	Aesculap	Prostokątne, z papieru, z nadrukiem i wskaźnikiem STEAM, Wielkość: 118 × 235 mm, rogi ścięte	1000	

Przeciwpyłowe opakowania posterylizacyjne stericlin®

Opakowanie ochronne z zabezpieczeniem samoprzylepnym



Ochronne torbki przeciwpyłowe firmy stericlin® to niezawodne opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania. Przedłużają one okres składowania sterylnych produktów medycznych.

Nr art.	Wielkość w cm (szerokość × długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSSV510102	20 × 30	1000
3FSSV510106	25 × 40	500
3FSSV510108	25 × 120	500
3FSSV510110	30 × 50	500
3FSSV510112	42 × 70	500
3FSSV510114	60 × 50	100
3FSSV510116	60 × 75	100
3FSSV510118	70 × 100	100

Opakowania podezynyfikcyjne stericlin®

Według zalecenia specjalistycznej komisji jakości (90) DGSV e. V.

Nasze woreczki podezynyfikcyjne stericlin® chronią niezawodnie zdezynyfikowane produkty medyczne przed ponownym skażeniem. Dzięki wolnej od zarazków wewnętrznej stronie nasze woreczki spełniają a nawet przekraczają zalecenia specjalistycznej komisji jakości (90) DGSV e. V. z roku 2015.



Nr art.	Wielkość w mm (szerokość × długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSSV512101	197 × 170	500
3FSSV512102	197 × 300	500
3FSSV512106	247 × 390	500
3FSSV512108	247 × 700	500
3FSSV512110	297 × 500	500
NEW 3FSSV512112	413 × 460	200
3FSSV512114	623 × 550	200

Woreczki zabezpieczające do eksplantów stericlin®

Opakowania transportowe i magazynowe do usuniętych implantów



Implanty są własnością pacjenta i na życzenie, po ich usunięciu, muszą zostać oddane. Nasze woreczki zabezpieczające do eksplantów stericlin® służą do transportu i magazynowania usuniętych implantów.

Nr art.	Wielkość w mm (szerokość × długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSSV514102	197 × 170	100
3FSSV514104	197 × 300	100
3FSSV514106	197 × 600	100

Stericlin® Opakowania ochronne do sond USG

W obu wersjach ZDEZYNFEKOWANE i SKAŻONE

Opakowania ochronne stericlin® na dopochwowe, doodbytnicze i brzuszne sondy USG przyczyniają się w znacznej mierze do prewencji skażeń i sygnalizują higieniczny sposób postępowania z tymi produktami medycznymi.

Podczas zastosowania opakowania ochronnego stericlin® w wersji „ZDEZYNFEKOWANEJ” wnętrze, wolne od drobnoustrojów zapewnia utrzymanie przygotowanego sprzętu w odpowiednim stanie i chroni sondę przed skażeniem aż do chwili jej użycia.

Podczas wewnętrznego transportu urządzeń USG z zamontowanymi sondami w szpitalu zastosowanie opakowań ochronnych stericlin® w wersji „SKAŻONEJ” chroni pacjentów, pracowników i gości przed bezpośrednim kontaktem ze skażonymi sondami USG.



Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Zawartość kartonu (szt.)
3FSSV516105	Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / do dopochwowych sond USG	97 x 460	100 (5 x 20)
3FSSV516110	Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / do doodbytniczych sond USG	97 x 760	100 (5 x 20)
3FSSV516115	Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / do brzusznych sond USG	177 x 290	100 (5 x 20)
3FSSV516205	Wersja „SKAŻONE” / do dopochwowych sond USG	97 x 460	100 (5 x 20)
3FSSV516210	Wersja „SKAŻONE” / do doodbytniczych sond USG	97 x 760	100 (5 x 20)
3FSSV516215	Wersja „SKAŻONE” / do brzusznych sond USG	177 x 290	100 (5 x 20)

Opaski kablowe z silikonu stericlin®

Wszechstronne zastosowanie: Łączenie, mocowanie, znakowanie, ...

NEW



Stericlin® opaska kablowa z silikonu



Stericlin® opaska kablowa z silikonu płaska, 190 mm



Art. 3FSZB720232



Opaska kablowa z silikonu okrągła,
110mm: Art. xxx230 – xxx242



Opaska kablowa z silikonu okrągła,
210mm: Art. xxx244 – xxx256

Nasze opaski kablowe stericlin® z silikonu produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Umożliwiają ochronę instrumentów i pozwalają na zachowanie przejrzystości w siatach na instrumenty. Dodatkowo, opaski kablowe stericlin® umożliwiają oznakowanie kolorystyczne koszy siatowych na instrumenty, koszy transportowych itp. Wysokie właściwości wytrzymałościowe zapewniają stosowanie we wszystkich powszechnie stosowanych procesach czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji - w temperaturze do 230°C.

Wzornictwo opasek kablowych stericlin® jest tak zaprojektowane, aby umożliwiała tworzenie wiązek instrumentów o różnych średnicach. Materiał silikonowy charakteryzuje się wysoką elastycznością i zapobiega w ten sposób uszkodzeniu instrumentów podczas łączenia w wiązki.


Opaski kablowe z silikonu stericlin® są dostępne w różnych długościach, kolorach i wzorach, aby spełnić wszystkie wymagania. Wszystkie warianty wyposażone są w haki mocujące na całej długości oraz dwa otwory w części przedniej. Kształt ten zapewnia wiele opcji zamocowania. Ponadto ryflowana powierzchnia części przedniej ułatwia uchwycenie i łatwe otwieranie opaski.

Nr art.	Opis	Wielkość (Długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB720230	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor niebieski	110 mm	100
3FSZB720232	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor żółty	110 mm	100
3FSZB720234	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor zielony	110 mm	100
3FSZB720236	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, naturalna / przezroczysta	110 mm	100
3FSZB720238	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor czerwony	110 mm	100
3FSZB720240	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor czarny	110 mm	100
3FSZB720242	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor fioletowy	110 mm	100
3FSZB720244	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor niebieski	210 mm	100
3FSZB720246	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor żółty	210 mm	100
3FSZB720248	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor zielony	210 mm	100
3FSZB720250	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, naturalna / przezroczysta	210 mm	100
3FSZB720252	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor czerwony	210 mm	100
3FSZB720254	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor czarny	210 mm	100
3FSZB720256	Opaska kablowa z silikonu, okrągła, Kolor fioletowy	210 mm	100

Opaski kablowe z silikonu stericlin®

NEW

Nr art.	Opis	Wielkość (Długość)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB720216	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor niebieski	110 mm	100
3FSZB720218	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor żółty	110 mm	100
3FSZB720220	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor zielony	110 mm	100
3FSZB720222	Opaska kablowa z silikonu, płaska, naturalna / przeźroczysta	110 mm	100
3FSZB720224	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor pomarańczowy	110 mm	100
3FSZB720226	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor czerwony	110 mm	100
3FSZB720228	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor czarny	110 mm	100
3FSZB720202	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor niebieski	190 mm	100
3FSZB720204	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor żółty	190 mm	100
3FSZB720206	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor zielony	190 mm	100
3FSZB720208	Opaska kablowa z silikonu, płaska, naturalna / przeźroczysta	190 mm	100
3FSZB720210	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor pomarańczowy	190 mm	100
3FSZB720212	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor czerwony	190 mm	100
3FSZB720214	Opaska kablowa z silikonu, płaska, Kolor czarny	190 mm	100
3FSZB720258	Sznurek z silikonu, płaski, Kolor zielony	300 mm	100
3FSZB720260	Sznurek z silikonu, płaski, Kolor niebieski	300 mm	100
3FSZB720262	Sznurek z silikonu, płaski, Kolor żółty	300 mm	100
3FSZB720264	Sznurek z silikonu, płaski, Kolor czerwony	300 mm	100
3FSZB720266	Sznurek z silikonu, płaski, Kolor pomarańczowy	300 mm	100

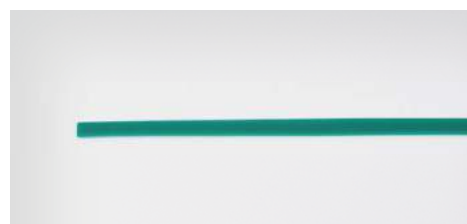Opaska kablowa z silikonu płaska,
110mm: Art. xxx116 – xxx228Opaska kablowa z silikonu płaska,
190mm: Art. xxx202 – xxx214Sznurek z silikonu płaski,
300mm: Art. xxx258 – xxx266

Kieszenie do instrumentów papierowo-foliowe stericlin®

Do ochrony wysokiej jakości instrumentów przed uszkodzeniem



Ochrona instrumentów stericlin® (InstruProtector) zabezpiecza niewielkie i delikatne instrumenty podczas sterylizacji oraz zachowuje je w danym miejscu. Dodatkowo InstruProtector pomaga zapobiegać uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań).

Pincety, uchwyty do noży, sondy: kieszenie do instrumentów firmy stericlin® pozwalają na przejrzyste sortowanie wszelkich części małych. Po zapelnieniu, kieszenie do instrumentów można złożyć lub zwinąć i optymalnie chronione poddać sterylizacji w koszu lub w przezroczystym opakowaniu.

Prosimy pamiętać: kieszenie do instrumentów nie posiadają właściwości bariery sterylnej, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej.

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB730102	Ochrona instrumentów (InstruProtector), Wielkość: 51 x 127 mm	250
3FSZB730104	Ochrona instrumentów (InstruProtector), Wielkość: 90 x 168 mm	100
3FSZB730120	Kieszenie do instrumentów, Wielkość: 52 x 21 cm, z wskaźnikiem STEAM	250

Kapturki ochronne na narzędzia Highline stericlin®

Ochrona przed uszkodzeniem zakończeń i krawędzi

NEW

Kapturki ochronne na narzędzia Highline Stericlin® są dostępne w różnych wariantach, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie narzędzi.

Łatwe w użyciu kapturki ochronne zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo, kapturki ochronne Highline zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skażeń i ukłuć u personelu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, celowo uniknięto wykonywania otworów w kapturkach ochronnych na narzędzia Highline Stericlin®, ponieważ, zgodnie z aktualnym stanem techniki, nie można ich wykonać przy zachowaniu całkowicie gładkiej powierzchni. Szczególnie w przypadku narzędzi o ostrych krawędziach, nie można wykluczyć oddzielenia cząstek od otworów w kapturkach ochronnych. Aby zapewnić bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, kapturki ochronne posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Dzięki temu kapturki nie są zbyt ciasne i nie przylegają do całej powierzchni narzędzi, a tym samym umożliwiają skuteczną sterylizację.

Wszystkie warianty kapturków nadają się do sterylizacji parowej.



3FSZB730456 - 3FSZB730411



3FSZB730452 - 3FSZB730445



Detail internal knobs

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor (translucent)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB730456	Kapturek okrągły	1,6 × 19	biały	100
3FSZB730420	Kapturek okrągły	1,6 × 19	jasny	100
3FSZB730458	Kapturek okrągły	2 × 19	niebieski	100
3FSZB730422	Kapturek okrągły	2 × 19	jasny	100
3FSZB730460	Kapturek okrągły	2,8 × 19	zielony	100
3FSZB730424	Kapturek okrągły	2,8 × 19	jasny	100
3FSZB730462	Kapturek okrągły	3,2 × 25,4	czerwony	100
3FSZB730426	Kapturek okrągły	3,2 × 25,4	jasny	100
3FSZB730464	Kapturek okrągły	5 × 25	żółty	100
3FSZB730428	Kapturek okrągły	5 × 25	jasny	100
3FSZB730411	Kapturek okrągły	10 × 19	fioletowy	100
3FSZB730413	Kapturek okrągły	10 × 19	jasny	100
3FSZB730452	Kapturek płaski	6,4 × 19	jasny	50
3FSZB730454	Kapturek płaski	2 × 9 × 25	jasny	100
3FSZB730444	Kapturek płaski	2 × 9 × 25	pomarańczowy	100
3FSZB730440	Kapturek płaski	12,7 × 25	jasny	50
3FSZB730466	Kapturek płaski	2 × 16 × 25	jasny	100
3FSZB730468	Kapturek płaski	2 × 16 × 25	brązowy	100
3FSZB730450	Kapturek płaski	19 × 25,4	jasny	50
3FSZB730446	Kapturek płaski	3 × 25 × 25	jasny	100
3FSZB730448	Kapturek płaski	3 × 25 × 25	czarny	100
3FSZB730441	Kapturek płaski	32 × 32	jasny	50

NEW



Kapturki ochronne na narzędzia Highline stericlín®

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor (półprzezroczysty)	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB730443	Kapturek płaski	38 × 38	jasny	50
3FSZB730445	Kapturek płaski	32 × 44,5	jasny	50
3FSZB730429	Kapturek podwójny	1,6 × 19	biały	50
3FSZB730431	Kapturek podwójny	2 × 19	niebieski	50
3FSZB730430	Kapturek podwójny	2,8 × 19	zielony	50
3FSZB730432	Kapturek podwójny	3,2 × 25	czerwony	50
3FSZB730434	Kapturek podwójny	5 × 25	żółty	50
3FSZB730435	Kapturek podwójny	2 × 9 × 25	pomarańczowy	50
3FSZB730486	Kapturek zwijacza	13 × 25	fioletowy	50
3FSZB730488	Kapturek zwijacza	13 × 25	jasny	50
3FSZB730490	Kapturek zwijacza	13 × 32	jasny	50
3FSZB730470	Kapturek spiczasty	Ø: 2 – 3 / Długość: 38	biały	70
3FSZB730472	Kapturek spiczasty	Ø: 3 – 4 / Długość: 38	niebieski	70
3FSZB730474	Kapturek spiczasty	Ø: 4 – 5 / Długość: 38	zielony	70
3FSZB730476	Kapturek spiczasty	Ø: 5 – 6 / Długość: 38	czerwony	70
3FSZB730477	Kapturek spiczasty	Ø: 6 – 7 / Długość: 38	żółty	70
3FSZB730478	Kapturek spiczasty	Ø: 7 – 8 / Długość: 38	fioletowy	70
3FSZB730480	Kapturek spiczasty	Ø: 2 – 3 / Długość: 51	biały	70
3FSZB730482	Kapturek spiczasty	Ø: 3 – 4 / Długość: 51	niebieski	70
3FSZB730483	Kapturek spiczasty	Ø: 4 – 5 / Długość: 51	zielony	70
3FSZB730484	Kapturek spiczasty	Ø: 5 – 6 / Długość: 51	czerwony	70
3FSZB730485	Kapturek spiczasty	Ø: 6 – 7 / Długość: 51	żółty	70
3FSZB730487	Kapturek spiczasty	Ø: 7 – 8 / Długość: 51	fioletowy	70

Testy szczelności zgrzewów stericlin®

Do rutynowej kontroli zgrzewów według DIN EN ISO 11607


Przeprowadzanie testu szczelności zgrzewów stericlin® jest bardzo proste i pokazuje szybko i niezawodnie kanały i wadliwe miejsca zgrzewów. Test ten, w połączeniu z testem zgrzewów wykonanych przez zgrzewarkę (Seal Test) stanowi kompleksową i pewną, rutynową kontrolę procesu zgrzewania na ciepło.

Test szczelności zgrzewu oferujemy w dwóch podstawowych wykonaniach: „pipeta” i „jednorazowy test barwnikowy”

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB830102	Test szczelności zgrzewu (75 ml), pipeta, DIN EN ISO 11607/ASTM F1929	1
3FSZB830103	Test szczelności zgrzewu „Liquid Control”, jednorazowy test barwnikowy, DIN EN ISO 11607/ASTM F1929 do przezroczystych opakowań z papieru i folii	30
3FSZB830104	Test szczelności zgrzewu „Liquid Control”, jednorazowy test barwnikowy, DIN EN ISO 11607 do przezroczystych opakowań z poliolefinów (DuPont™ Tyvek®) i folii	30



Test integralności uszczelnienia podczas aplikacji

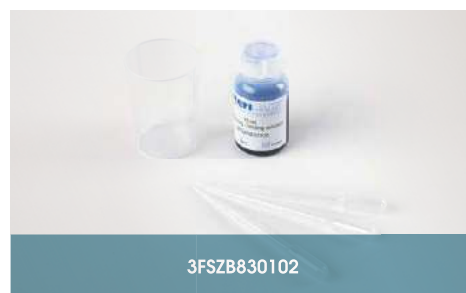

3FSZB830102



3FSZB830103

Testy zgrzewów stericlin® Seal Test

Do rutynowej kontroli zgrzewów według DIN EN ISO 11607



Test uszczelnienia podczas aplikacji

Test zgrzewów stericlin® Seal Test znajduje zastosowanie w rutynowej kontroli zgrzewarek i pokazuje jednoznacznie i wyraźnie wady i uszkodzenia zgrzewu. W połączeniu z testem szczelności zgrzewu test ten stanowi kompleksową i pewną, rutynową kontrolę procesu zgrzewania na ciepło.

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB830106	Papier Seal Test, DIN EN ISO 11607	250
3FSZB830108	Seal Test dla DuPont™ Tyvek®, DIN EN ISO 11607	125



3FSZB830106 - paper



3FSZB830108 - DuPont™ Tyvek®

Chusteczki z mikrofibry stericlin[®]

Kompatybilne z typowo dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi

Chusteczki higieniczne stericlin[®] wykonane w 100 % z mikrowłókniny są kompatybilne z typowo dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi, nie strzepią się i charakteryzują się doskonałą wydajnością czyszczenia i wchłaniania zanieczyszczeń.

Zdolność wchłaniania wynosi 850 % przy cięŜarze powierzchniowym 60 g/m².

Prosimy pamiętać, że chusteczki higieniczne są przeznaczone tylko do jednokrotnego uŜytku.



Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB790120	Chusteczka higieniczna z mikrowłókniny (jednorazowa). Kolor: biały, Wielkość: 305 × 340 mm, Zawartość kartonu: 8 × 40 szt.	320

Worki na odpady stericlin® z paskiem samoprzylepnym

Proste rozwiązanie do utylizacji



Worki na odpady stericlin® mogą być używane do utylizacji różnych odpadów i można je przymocować do łóżka pacjenta, na przykład za pomocą paska samoprzylepnego.

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB710130	Worek na odpady z paskiem samoprzylepnym z tyłu, materiał: folia (LDPE), Rozmiar: 22 x 25 cm	1000

Stericlin® karton do utylizacji

Ze zintegrowanym workiem foliowym

Do utylizacji zanieczyszczonych opakowań transportowych stericlin® jak również innych odpadów klinicznych doskonale nadaje się karton do utylizacji stericlin® z uwagi na jego wielkość i wykonanie oraz wyposażenie w zintegrowany worek foliowy.

Stabilne uchwyty i łatwe zamknięcie zapewniają bezpieczny transport.

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB855310	Karton utylizacyjny do skrzyni transportowej ze zintegrowanym workiem foliowym (Na około 40 sztuk pojedynczych elementów)	365 × 270 × 590	10





steriCLIN®

Znakowanie / dokumentacja



Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® do drukarek termotransferowych

Wykaż się odpowiedzialnością wobec pacjentów – każda kontrola sterylizacji musi spełniać to wymaganie i umożliwiać łatwe i ekonomiczne zapisy w dokumentacji pacjenta. Postawiliśmy sobie to zadanie w projektowaniu naszych produktów. Zaufaj firmie stericlin®!

Oferujemy różnorodne etykiety samoprzylepne i folie termotransferowe do wszystkich popularnych drukarek termotransferowych i systemów dokumentacji, paski wskaźnikowe i etykiety do ręcznego etykietowania typu STEAM, EO, FORM, VH2O2 (plazma) i napromienianie.



Etykiety samoprzylepne stericlin®, rolka do druku ciągłego

Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w połączeniu z drukarkami termotransferowymi. W przypadku „rolek do druku ciągłego” to Państwo określają długość pojedynczych etykiet, dostosowaną do Państwa potrzeb. Etykiety samoprzylepne stericlin® dostępne są ze wskaźnikiem lub bez niego, jedno- lub dwustronnie samoprzylepne.

Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu		
3FSKS675103	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), klej modyfikowany o mniejszej przyczepności, Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 50 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki		
3FSKS675105	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 50 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki		
3FSKS675106	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 76 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki		
3FSKS675108	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, jednokrotnie samoprzylepne, Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 50 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki		

Etykiety samoprzylepne stericlin®, rolka do druku ciągłego

	Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu
 	3FSKS675110	Papier	ze wskaźnikiem STEAM i FORM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 50 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki
 	3FSKS675120	DuPont™ Tyvek®	ze wskaźnikiem VH2O2 (PLAZMA), dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Szerokość rolki: 70 mm, Gilza: 50 mm, Długość rolki: 40 m	5 rolki
 	3FSKS675190	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, papier specjalny nie samoprzylepny, Gilza: 50 mm, Szerokość rolki: 70 mm, Długość rolki: 80 m	5 rolki



Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach

Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w połączeniu z drukarkami termotransferowymi. W wersji „pojedynczej” dysponujemy szeroką gamą różnych formatów i podziałów, dostosowaną do Państwa potrzeb. Etykiety samoprzylepne stericlin® dostępne są ze wskaźnikiem lub bez niego, jedno- lub dwustronnie samoprzylepne.



Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu	
3FSKS675130	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 55 x 31 mm, Głiza: 40 mm, Szerokość rolki: 58 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675131	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 55 x 33 mm, Głiza: 40 mm, Szerokość rolki: 58 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675132	Papier	ze wskaźnikiem STEAM i EO, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 55 x 33 mm, Głiza: 40 mm, Szerokość rolki: 58 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675133	Folia	ze wskaźnikiem VH2O2, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 55 x 33 mm, Głiza: 40 mm, Szerokość rolki: 58 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
NEW 3FSKS675134	Papier	ze wskaźnikiem STEAM i FORM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 55 x 33 mm, Głiza: 40 mm, Szerokość rolki: 58 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	

Etykiety samoprzylepne stericlein®, pojedyncze w różnych formatach




	Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu
	3FSKS675135	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 58 x 35 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 63 mm, Rolka po 1 000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675140	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 60 x 31 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 64 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675145	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 60 x 44 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 64 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675150	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 63 x 40 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 67 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675153	DuPont™ Tyvek®	ze wskaźnikiem VH2O2, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 70 x 35 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 73 mm, Rolka po 1000 szt.	2000 szt.
	3FSKS675155	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 70 x 35 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 73 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.



Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach

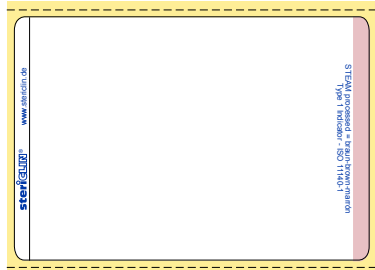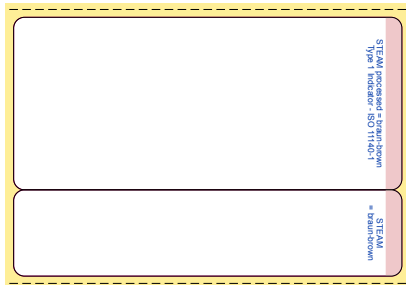Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu	
3FSKS675156	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 70 x 35 mm, Gilza: 76 mm, Szerokość rolki: 73 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675158	Papier	bez nadruku/bez wskaźnika, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 75 x 35 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 78 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675159	Papier	bez nadruku / bez wskaźnika, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 75 x 35 mm, Gilza: 76 mm, Szerokość rolki: 78 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675160	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, obustronnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 90 x 35 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 93 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	
3FSKS675162	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 70 x 48 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 73 mm, Rouleau à 1000 pièces	10000 szt.	
3FSKS675163	Papier	ze wskaźnikiem VH2O2, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 42 x 48 mm, Gilza: 76 mm, dzielenie poziomo w górnej (= 72 x 16 mm + 72 x 32 mm), Szerokość rolki: 75 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.	

Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach


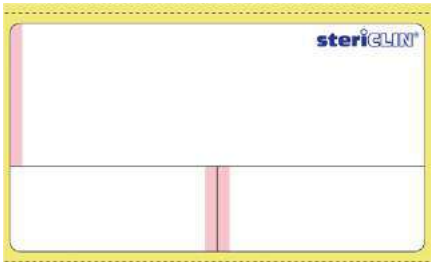
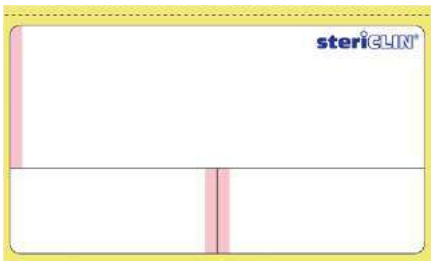
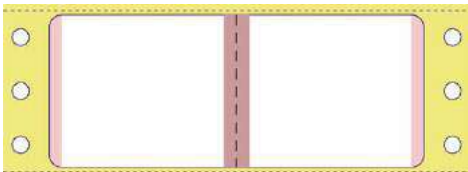
	Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu
	3FSKS675165	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 102 x 56 mm, Gilza: 40 mm, teowe nacięcie materiału wierzchniego (= 102 x 35 mm + 51 x 21 mm x 2), Szerokość rolki: 105 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675166	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), Wielkość: 102 x 56 mm, Gilza: 40 mm, teowe nacięcie materiału wierzchniego (= 102 x 35 mm + 51 x 21 mm x 2), Szerokość rolki: 105 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675170	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 70 x 38,1 mm, Gilza: 40 mm, 3 mm szerokość markera na odwrocie dla drukarki, Szerokość rolki: 70 mm, Rolka po 2500 szt.	10000 szt.
	3FSKS675175	Papier	ze wskaźnikiem STEAM, jednokrotnie samoprzylepne w środku perforowany, Wielkość: 88,5 x 36 mm, Gilza: 40 mm z perforowaną krawędzią, Szerokość rolki: 110 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.
	3FSKS675180	Papier	ze wskaźnikiem STEAM i FORM, jednokrotnie samoprzylepne w środku perforowany, Wielkość: 88,5 x 36 mm, Gilza: 40 mm z perforowaną krawędzią, Szerokość rolki: 110 mm, Rolka po 1000 szt.	10000 szt.








Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów

Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w połączeniu z drukarkami termotransferowymi. Do rozróżnienia kolorów, na przykład daty ważności na opakowaniu produktów medycznych, jeden rozmiar etykiet samoprzylepnych stericlin® ze wskaźnikiem STEAM dostępny jest obecnie w 12 różnych wersjach. Kolejność lub przyporządkowanie do miesiąca można określić w zależności od potrzeb.

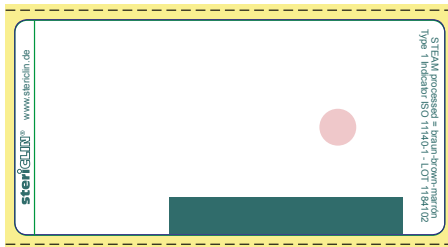
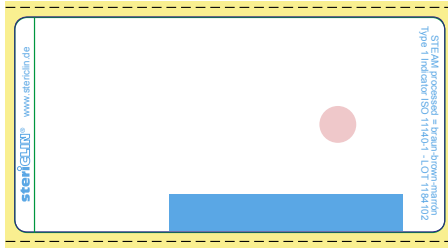
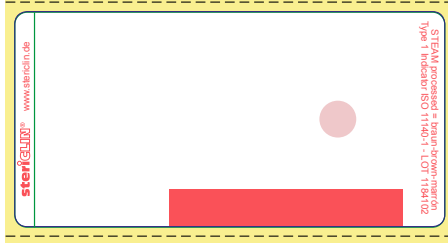
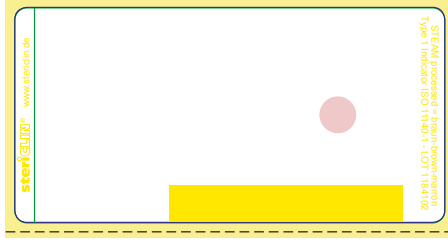
Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu	
3FSKS675305	Papier	Pasek koloru zielony, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675306	Papier	Pasek koloru niebieski, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675307	Papier	Pasek koloru czerwony, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675308	Papier	Pasek koloru żółty, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	

Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów

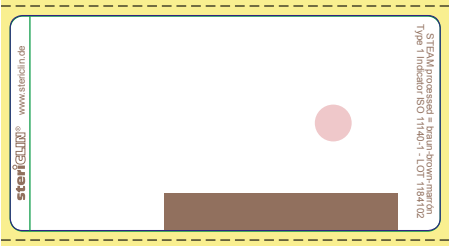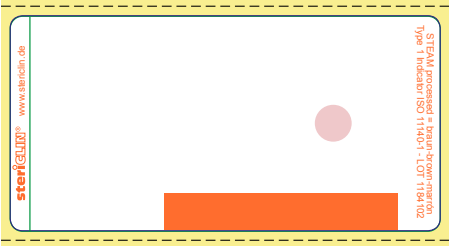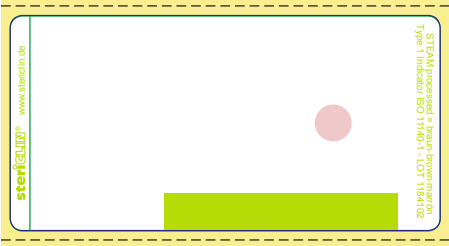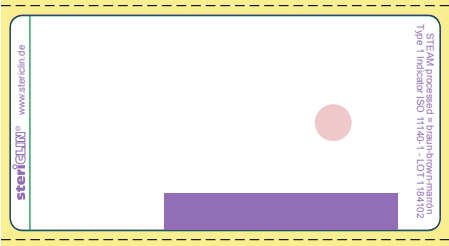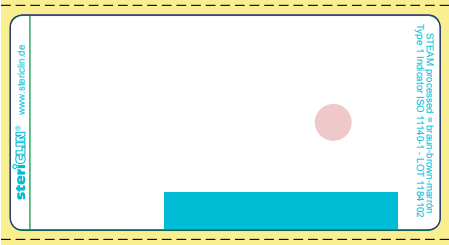	Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu
	3FSKS675309	Papier	Pasek koloru brązowy, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.
	3FSKS675310	Papier	Pasek koloru pomarańczowy, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.
	3FSKS675311	Papier	Pasek koloru jasnozielony, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.
	3FSKS675312	Papier	Pasek koloru fioletowy, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.
	3FSKS675313	Papier	Pasek koloru turkusowy, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.




Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów

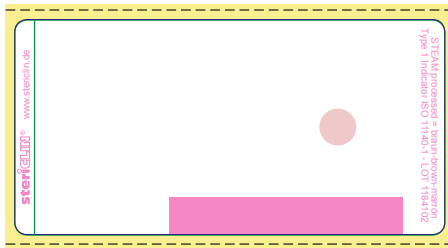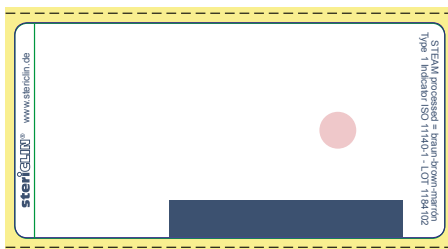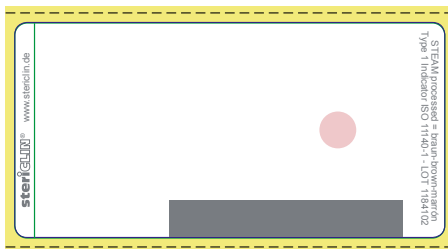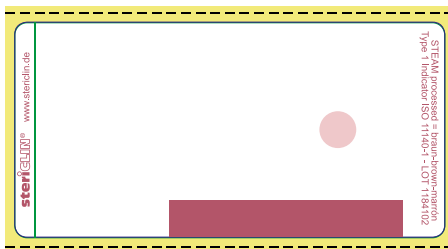Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu	
3FSKS675314	Papier	Pasek koloru różowy, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675315	Papier	Pasek koloru ciemnoniebieski, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675316	Papier	Pasek koloru szary, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	
3FSKS675317	Papier	Pasek koloru burgund, ze wskaźnikiem STEAM, dwukrotnie samoprzylepne (sandwich), wielkość: 70 x 35 mm, tulejka: 40 mm, szerokość rolki: 73 mm, rolka na 1000 sztuk	10000 szt.	

Etykiety samoprzylepne stericlin® do trwałego znakowania

Odporne na czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację. Znakowanie produktów medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w połączeniu z drukarkami termotransferowymi. Do trwałego znakowania produktów medycznych produkowane są etykiety samoprzylepne stericlin® wykonane z materiału foliowego, bez wskaźnika. Do nadrukowania polecamy folię termotransferową AXR® 8 - idealnie nadaje się do tego zastosowania.

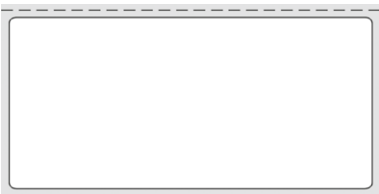	Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu
	3FSKS675210	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 43 mm, Rolka po 1000 szt.	1000 szt.
	3FSKS675215	Folia	Do trwałego znakowania bez druku/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 50 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 53 mm, Rolka po 1000 szt.	1000 szt.
	3FSKS675217	Folia	Do trwałego znakowania bez druku/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 54 x 16 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 53 mm, Rolka po 1000 szt.	1000 szt.
	3FSKS675220	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 70 x 33 mm, Gilza: 40 mm, Szerokość rolki: 73 mm, Rolka po 1000 szt.	1000 szt.



Etykiety samoprzylepne stericlin® do trwałego znakowania

Nr art.	Materiał	Opis	Zawartość kartonu	
3FSKS675224	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 14 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: biały	1000	
3FSKS675230	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: biały	1000	
3FSKS675232	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: czerwony	1000	
3FSKS675234	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: zielony	1000	
3FSKS675236	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: niebieski	1000	
3FSKS675238	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: żółty	1000	
3FSKS675240	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: jasnoszary	1000	
3FSKS675242	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: różowy	1000	
3FSKS675244	Folia	Do trwałego znakowania bez drukowania/bez wskaźnika, jednokrotnie samoprzylepne, Wielkość: 40 x 28 mm, Gilza: 40 mm, Kolor: pomarańczowy	1000	



Etykiety samoprzylepne stericlin® do ręcznego opisywania / znakowania

Odporne na sterylizację. Do znakowania i dokumentowania produktów medycznych

Przy pomocy naszych etykiet do dokumentów stericlin® do ręcznego opisywania i znakowania można łatwo i profesjonalnie oznakować i udokumentować wszystkie produkty medyczne i systemy barier sterylnych.

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)	
3FSKS670102	dwukrotnie samoprzylepne, ze wskaźnikiem STEAM i EO, Nacięcie materiału wierzchniego i nośnego jako pomoc w oddzielaniu, Wielkość: 80 x 34 mm (pojedyncza etykieta), po 250 szt. w kartonie z podajnikiem	1000	
3FSKS670106	jednokrotnie samoprzylepne, ze wskaźnikiem STEAM, Format etykiet: 25 x 20 mm (25 etykiet na arkusz)	2500	
3FSKS670108	jednokrotnie samoprzylepne, ze wskaźnikiem FORM, Format etykiet: 25 x 20 mm (25 etykiet na arkusz)	2500	
3FSKS670110	jednokrotnie samoprzylepne, ze wskaźnikiem EO, Format etykiet: 25 x 20 mm (25 etykiet na arkusz)	2500	
3FSKS670112	jednokrotnie samoprzylepne, ze wskaźnikiem VH2O2 (PLAZMA), Format etykiet: 25 x 20 mm (25 etykiet na arkusz)	2500	

System stericlin® do dokumentowania wsadu dla konkretnego pacjenta

Odporne na sterylizację. Do znakowania i dokumentowania produktów medycznych

Nasz system stericlin® do dokumentowania wsadu dla konkretnego pacjenta pozwala na łatwe i profesjonalne zapewnienie identyfikacji pochodzenia produktów medycznych i barier sterylnych bez pomocy specjalnego technicznego wyposażenia.

Ten system można także wykorzystać jako system do dokumentowania wsadów w ramach koncepcji pracy w sytuacji awaryjnej (np. w razie awarii systemu dokumentowania opartego na instalacji IT).


	Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)
	3FSKS680102	etykiety samoprzylepne jednokrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem STEAM z nadrukiem i kodowaniem, Wielkość: 92 x 40 mm, Karton z podajnikiem po 250 szt.	1000
	3FSKS680106	Karta wsadu A5 format poziomy ze wskaźnikiem STEAM, bez perforacji	600



Etykiety Stericlin® Info z nadrukiem

Znormalizowane oznakowanie wyrobów medycznych



Dzięki naszym wstępnie wypełnionym etykietom stericlin® można wskazać konkretne cechy i właściwości wyrobów medycznych.

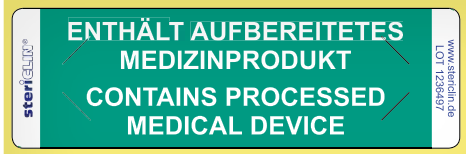Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (szt.)	
3FSZB710178	Etykieta stericlin® informująca o stanie higienicznym, dwukrotnie przyklepna, usuwalna bez pozostawiania śladów, 1 etykieta: zielona z nadrukiem „Gereinigt/Clean”, 1 etykieta: czerwona z nadrukiem „Kontaminiert/Contaminated”, na rolce, rdzeń: 76 mm, rozmiar: 100 x 100 mm	500	
3FSZB710180	Etykieta naklejana, czerwony, „zawartość zanieczyszczona”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo, Wielkość: 80 x 25 mm	500	
NEW 3FSZB710182	Etykieta naklejana, czerwony, „contains used medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo, Wielkość: 80 x 25 mm	500	
NEW 3FSZB710190	Etykieta naklejana, zielony, „contains processed medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo, Wielkość: 80 x 25 mm	500	
NEW 3FSZB710194	Etykieta naklejana, zielony, „contains sterilised medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo, Wielkość: 80 x 25 mm	500	

Taśma identyfikacyjna

Szybka i łatwa metoda kodowania kolorami

NEW

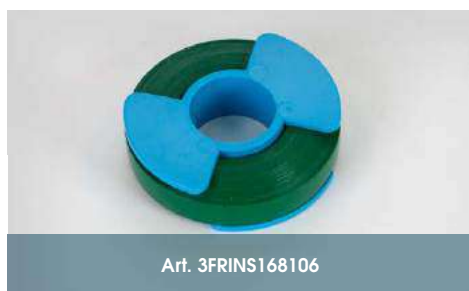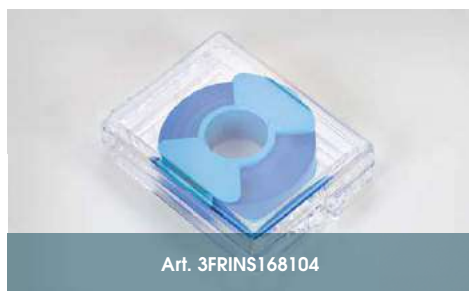

Taśma identyfikacyjna ułatwia organizację i identyfikację poszczególnych produktów w CSSD, a także podczas transportu między obszarami dekontaminacji i innymi obszarami funkcjonalnymi.

Materiał z łatwością znosi czyszczenie i dezynfekcję chemiczno-termiczną oraz obróbkę parą.

Dostarczany w przezroczystym, zamykanym plastikowym pudełku.

Nr art.	Wielkość (szerokość × długość)	Kolor	Zawartość kartonu (roll)
3FRINS168102	6,5 mm × 7,6 m	biały	1
3FRINS168104	6,5 mm × 7,6 m	niebieski	1
3FRINS168106	6,5 mm × 7,6 m	zielony	1
3FRINS168108	6,5 mm × 7,6 m	czerwony	1
3FRINS168110	6,5 mm × 7,6 m	złoty	1
3FRINS168112	6,5 mm × 7,6 m	fioletowy	1
3FRINS168114	6,5 mm × 7,6 m	pomarańczowy	1
3FRINS168116	6,5 mm × 7,6 m	brązowy	1
3FRINS168118	6,5 mm × 7,6 m	czarny	1



Folie termotransferowe stericlin®

Optymalne uzupełnienie nadruku na etykietach samoprzylepnych stericlin®

Folia termotransferowa stericlin® APX® FH+ jest najwyższej klasy barwną folią woskową/żywiczną. Gwarantuje ona doskonałą jakość transferu na wszystkich gładkich powierzchniach z papieru i tworzyw sztucznych przy niskim zużyciu energii.

Termotransferowy nadruk na samoprzylepnych etykietach stericlin® zachowuje swoje kolory podczas sterylizacji parą zgodnie z wymogami norm EN 646 i EN 648. Potwierdza to świadectwo badania wydane przez ISEGA.

Folia termotransferowa stericlin® AXR® 8 w połączeniu z naszymi samoprzylepnymi, foliowymi etykietami stericlin® nadaje się do trwałego znakowania kontenerów lub koszy do instrumentów. Kombinacja ta jest odporna na obróbkę w urządzeniu do czyszczenia i sterylizacji i na sterylizację parą.

Przegląd dalszych zalet folii transferowych stericlin®:

- Bardzo dobra odporność na zmywanie i zadrapania
- Odporność na wysoką temperaturę do 150 °C
- Bardzo dobra jakość druku i rozdzielczość
- Wielostronność i czułość

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie prędkości i temperatury posiadanej drukarki.



3FSGZ815460



3FSGZ815462

Nr art.	Opis	Zawartość kartonu (rolki)
3FSGZ815460	Folia termotransferowa APX® FH+, powlekana zewnątrz, 80 mm/74 m, Gilza 12,7 mm Ø	10
3FSGZ815462	Folia termotransferowa APX® FH+, powlekana zewnątrz, 80 mm/300 m, Gilza 25,4 mm Ø	5
3FSGZ815472	Folia termotransferowa APX® FH+, powlekana zewnątrz, 110 mm/300 m, Gilza 25,4 mm Ø	5
3FSGZ815480	Folia termotransferowa AXR® 8, powlekana zewnątrz, 60 mm/74 m, Gilza 12,7 mm Ø	5
3FSGZ815482	Folia termotransferowa AXR® 8, powlekana na zewnątrz, 60 mm/300 m, Gilza: 25,4 mm Ø	1
3FSGZ815484	Folia termotransferowa AXR® 8, powlekana na zewnątrz, 83 mm/74 m, Gilza: 12,7 mm Ø	1

Pisaki stericlin®

Do opisywania artykułów jednorazowego użytku



Systemy barier sterylnych, taśmy samoprzylepne, etykiety i wiele innych:
Nasze odporne na sterylizację pisaki stericlin® opracowaliśmy do opisywania większości powierzchni. Pisaki te oferujemy w trzech kolorach o szerokości kreski „F” (ok. 0,6 mm).

Prosimy pamiętać: Przezroczyste opakowania można opisywać tylko na stronie foliowej i poza obrysem zawartości opakowania.

Nr art.	Kolor	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB710102	czarne	10
3FSZB710104	niebieskie	10

steriCLIN®



Logistyka materiałów sterylnych



Do bezpiecznego transportu i magazynowania produktów medycznych

Nasze ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji systemów wskaźników, systemów bariery sterylnej i akcesoriów do sterylizacji skłoniło nas do zaoferowania asortymentu wysokiej jakości wyrobów do transportu i przechowywania urządzeń medycznych.

- Opakowanie transportowe
- Maty silikonowe
- Siateczkowe osłony koszy na instrumenty wykonane z silikonu
- Tabliczki do koszy sitowych
- Kosze na instrumenty i akcesoria

Opakowanie transportowe steriCLIN®

Jednorazowe opakowanie do utylizacji, nie przepuszczające cieczy

NEW



3FSZB710102



Warianty pudełek transportowych



Skrzynie transportowe na sondy TEE i endoskopy



Art. 3FSZB855108 + xxx128



Art. 3FSZB855110 + xxx130

Skrzynia transportowa steriCLIN® to rozwiązanie, zapewniające higienę i bezpieczeństwo podczas utylizacji i transportu zanieczyszczonych instrumentów z bloku operacyjnego do przygotowania w Centralnej Sterylizatorni.

Opakowanie jednorazowego użytku, łatwe do obsługi - ekonomiczna alternatywa kontenerów utylizacyjnych z metalu lub tworzywa sztucznego. Użycie skrzyń transportowych steriCLIN® znacznie obniża koszty obsługi, stwarza wolne moce produkcyjne w myjni kontenerów lub RDG i tym samym oszczędza energię, wodę i chemikalia do czyszczenia.

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB855108	Opakowanie transportowe, dno, wielkość M (Pasuje do siła ½ DIN 24 x 25 cm)	284 x 280 x 102	50
3FSZB855128	Opakowanie transportowe, pokrywa, wielkość M	300 x 290 x 92	50
3FSZB855110	Opakowanie transportowe, dno, wielkość L (Pasuje do siła DIN 48 x 25 cm)	531 x 280 x 102	50
3FSZB855130	Opakowanie transportowe, pokrywa, wielkość L	547 x 290 x 92	50
3FSZB855112	Opakowanie transportowe, dno, wielkość XL (przystosowany do siła DIN 54 x 25 cm lub sił wypożyczonych)	576 x 280 x 139	50
3FSZB855132	Opakowanie transportowe, pokrywa, wielkość XL	592 x 290 x 129	50
3FSZB855114	Opakowanie transportowe, dno, wielkość XXL	706 x 415 x 112	50
3FSZB855134	Opakowanie transportowe, pokrywa, wielkość XXL	722 x 425 x 102	50
3FSZB855118	Opakowanie transportowe, dno, „ROBOT” (Pasuje do DaVinci instrumenty „XI”, „SI” i optyka)	831 x 255 x 117	50
3FSZB855138	Opakowanie transportowe, pokrywa, „ROBOT”	847 x 265 x 107	50
3FSZB855154	Opakowanie transportowe, dno, „TEE” (Pasuje do TEE-sondy)	601 x 355 x 72	50
3FSZB855174	Opakowanie transportowe, pokrywa, „TEE”	617 x 365 x 62	50
3FSZB855158	Opakowanie transportowe, dno, „ENDO” (Pasuje do endoskopy)	601 x 465 x 122	50
3FSZB855178	Opakowanie transportowe, pokrywa, „ENDO”	617 x 475 x 112	50



Akcesoria do skrzyń transportowych stericlin®

Dodatkowe produkty ułatwiające obsługę

NEW

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie ze skrzyni transportowej stericlin®, udostępniamy zestaw akcesoriów. Niezależnie od tego, czy jest to elastyczny uchwyt do przenoszenia, etykiety samoprzylepne czy pojemniki na odpady, produkty te ułatwiają codzienne życie w szpitalu.

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Zawartość kartonu (szt.)
3FSZB855210	Uchwyt dla opakowanie transportowe „TEE” i „ENDO”		100
3FSZB710178	Etykieta stericlin® informująca o stanie higienicznym, dwustronnie klejąca, usuwalna bez pozostawiania śladów, 1 etykieta: zielona z nadrukiem „Gereinigt/Clean”, 1 etykieta: czerwona z nadrukiem „Kontaminiert/Contaminated”, na rolce, rdzeń: 76 mm, rozmiar: 100 x 100 mm	100 x 100	500
3FSZB710180	Etykieta naklejana, czerwony, „zawartość zanieczyszczona”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo	80 x 25	500
3FSZB710182	Etykieta naklejana, czerwony, „contains used medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo	80 x 25	500
3FSZB710190	Etykieta naklejana, zielony, „contains processed medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo	80 x 25	500
3FSZB710194	Etykieta naklejana, zielony, „contains sterilised medical device”, z przetłoczeniem zapewniającym bezpieczeństwo	80 x 25	500
3FSZB855310	Karton utylizacyjny do skrzyni transportowej ze zintegrowanym workiem foliowym (Na około 40 sztuk pojedynczych elementów)	365 x 270 x 590	10

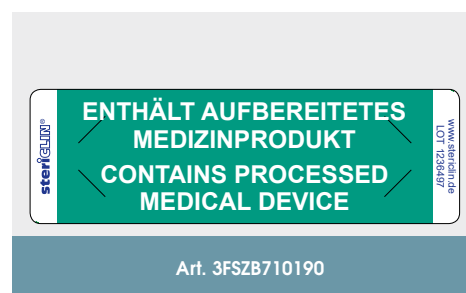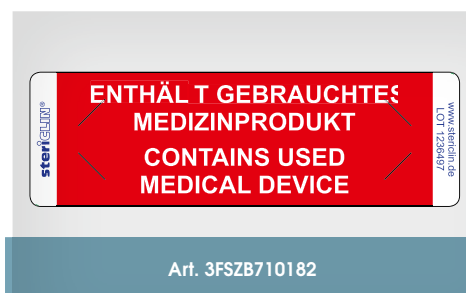

Silikonowe maty siatkowe stericlin®

Elastyczne wkładki do koszy na narzędzia, zapobiegające ich przesuwaniu się

NEW



Mata silikonowa do koszy z płytami perforowanymi




Mata silikonowa do koszy z siatki drucianej



Mata silikonowa do koszy systemowych / transportowych



Art. 3FEDS842412

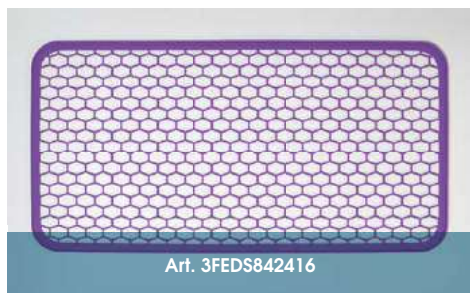

Art. 3FEDS842416

Nasze silikonowe maty siatkowe stericlin® łączą ochronę przed poślizgiem z trwałością.

Maty nadają się do mycia w myjni-dezynfektorze, a dzięki ulepszonej strukturze jeszcze skuteczniej zapobiegają gromadzeniu się wilgoci.

Do koszy z perforowanymi bokami oraz koszy z siatki drucianej oferujemy odpowiedni rozmiar maty z siatki.

Nr art.	Opis	Wielkość (mm)	Zawartość kartonu
3FEDS842412	Mata silikonowa do koszy z płytami perforowanymi 1/2, o strukturze sześciokątnej do lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	238 x 248	1 szt.
3FEDS842414	Mata silikonowa do koszy z płytami perforowanymi 1/1, o strukturze sześciokątnej do lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	480 x 250	1 szt.
3FEDS842416	Mata silikonowa do koszy z siatki drucianej 1/1, o strukturze heksagonalnej do lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	460 x 229	1 szt.
3FEDS842418	Mata silikonowa do koszy z siatki drucianej 1/2, o strukturze heksagonalnej do lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	215 x 229	1 szt.
3FEDS842402	Mata silikonowa do koszy systemowych / transportowych 1/1, odporna na ciepło: do 200°C	540 x 280 x 3	1 szt.

Siateczkowe osłony kosza na narzędzia stericlin® wykonane z silikonu


Do bezpiecznego mocowania narzędzi i akcesoriów

NEW

Nasze silikonowe osłony siatekowe stericlin® zapewniają bezpieczne mocowanie narzędzi i akcesoriów podczas dekontaminacji.

Udoskonalona konstrukcja heksagonalnej struktury jeszcze bardziej zapobiega gromadzeniu się wilgoci.

Pokrywy koszy na instrumenty z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej zapewniają zwiększoną stabilność ze względu na ich większą wagę.

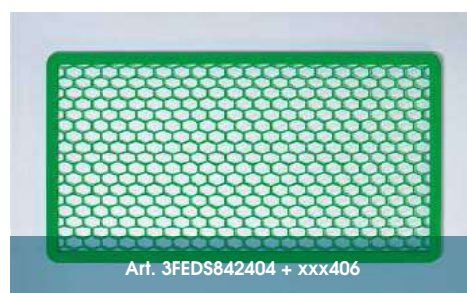

Nr art.	Opis	Wielkość (mm)	Zawartość kartonu
3FEDS842404	Pokrywa kosza z siatki silikonowej, elastyczna, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	440 x 230	1 szt.
3FEDS842406	Pokrywa kosza z siatki silikonowej, sztywna, z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej i sześciokątną konstrukcją zapewniającą lepsze suszenie, odporna na ciepło: do 200°C	440 x 230	1 szt.
3FEDS842408	Pokrywa kosza z siatki silikonowej, elastyczna, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na ciepło: do 200°C	230 x 210	1 szt.
3FEDS842410	Pokrywa kosza z siatki silikonowej, sztywna, z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej i sześciokątną konstrukcją zapewniającą lepsze suszenie, odporna na ciepło: do 200°C	230 x 210	1 szt.

Tabliczki do koszy siatowych stericlin® ze stali nierdzewnej

Do oznakowania, przyporządkowywania i przekazywania informacji

NEW



Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej mocowana zatyczkami silikonowymi



Etykieta zawieszana na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej



Uchwyt na etykietę z tworzywa sztucznego
Art. 3FEDS843106

Tabliczki do koszy siatowych stericlin® ze stali nierdzewnej są nieodzowne w każdym Dziale Centralnej Sterylizacji, ponieważ umożliwiają identyfikację poszczególnych koszy siatowych, instrumentów i zestawów, a nawet wózków transportowych. Ważne informacje, takie jak przynależność do oddziału specjalistycznego, zawartość, kody kreskowe i wiele innych, mogą być nanoszone na tabliczki za pomocą etykiet, graweru laserowego lub wytrawiania, jak również etykiet P-touch.

Oferujemy tabliczki do koszy siatowych stericlin® w dwóch wersjach:
Tabliczki do koszy siatowych / Tabliczki wkładane

Zawieszki na kosze można mocować za pomocą naszych silikonowych zatyczek (str. 54) lub silikonowych opasek zaciskowych (str. 68).

Więcej informacji na temat zastosowań poszczególnych artykułów można uzyskać od naszych przedstawicieli lub na stronie internetowej www.stericlein.pl

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Opakowanie handlowe (szt.)
3FEDS843124	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4404	90 × 50	50
3FEDS843120	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4404	90 × 33	50
3FEDS843118	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	90 × 30	25
3FEDS843122	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	90 × 50	25
3FEDS843102	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	30 × 30	25
3FEDS843114	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	70 × 30	25
3FEDS843104	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	42 × 36	25
3FEDS843108	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	55 × 30	25
3FEDS843116	Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4310	75 × 35	25
3FEDS843106	Uchwyt na etykietę na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej do etykiet z tworzywa sztucznego, Materiał: 1.4310	50 × 20	25
3FEDS843110	Uchwyt na etykietę na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej do etykiet z tworzywa sztucznego, Materiał: 1.4310 Rozmiar: 60 x 40 mm	60 × 40	25
3FEDS843112	Etykieta zawieszana na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej, Materiał: 1.4404	65 × 24	5

Tabliczki na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z oznaczeniem kolorystycznym

Do identyfikacji, przyporządkowania i przekazywania informacji

NEW

Nasze nowe tabliczki na kosze sitowe stericlin® ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną wykonaną z silikonu łączą po raz pierwszy zalety trwałej stali nierdzewnej z możliwościami identyfikacji konwencjonalnych tabliczek z tworzywa. Kolorowe wkładki silikonowe można przyporządkować na przykład do działów, priorytetów lub przynależności.


Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor	Zawartość kartonu (szt.)
3FEDS843152	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 30	niebieski	10
3FEDS843154	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 30	czerwony	10
3FEDS843156	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 30	żółty	10
3FEDS843158	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 30	zielony	10
3FEDS843168	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 50	niebieski	10
3FEDS843170	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 50	czerwony	10
3FEDS843172	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 50	żółty	10
3FEDS843174	Tabliczka zaciskowa na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z identyfikacją kolorystyczną z silikonu	90 × 50	zielony	10



Art. 3FEDS843152 - xxx170



Art. 3FEDS843152 - xxx170

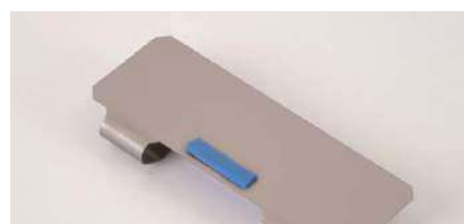


Art. 3FEDS843152

Plastikowe zawieszki na narzędzia stericlin®

W różnych kolorach, aby odróżnić działy lub priorytety

NEW

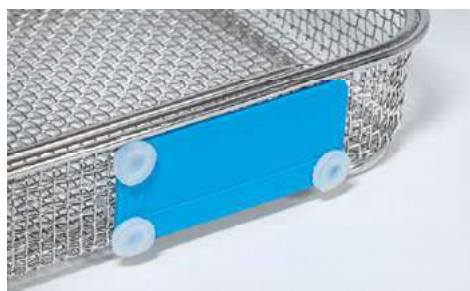

Art. 3FEDS843402



Art. 3FEDS843404



Art. 3FEDS843406

Nasze zawieszki do koszy na narzędzia stericlin® wykonane ze wzmocnionego tworzywa poliamidowego łączą elastyczność i trwałość użycia plastikowej zawieszki z lepszą przyczepnością etykiet informacyjnych do zawieszki.

Oferujemy różne kolory, aby odróżnić działy lub priorytety.

Zawieszki na narzędzia można mocować za pomocą naszych silikonowych zatyczek (str. 55) lub silikonowych opasek zaciskowych (str. 69).

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor	Zawartość kartonu (szt.)
3FEDS843402	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	niebieski	100
3FEDS843404	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	żółty	100
3FEDS843406	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	szary	100
3FEDS843408	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	zielony	100
3FEDS843410	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	błękit nieba	100
3FEDS843412	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	fioletowy	100
3FEDS843414	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	królewski niebieski	100
3FEDS843416	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	pomarańczowy	100
3FEDS843418	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	różowy	100
3FEDS843420	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	czerwony	100
3FEDS843422	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	czarny	100

Plastikowe zawieszki na narzędzia stericlin®

NEW

Nr art.	Opis	Wielkość w mm	Kolor	Carton content (szt.)
3FEDS843424	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	biały	100
3FEDS843426	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	terakota	100
3FEDS843428	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	limonka	100
3FEDS843430	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	turkus	100
3FEDS843432	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	musztarda	100
3FEDS843434	Materiał: poliamid, 30% nylon wypełniony włóknem szklanym, odporny na temperaturę do 134°C	90 x 38	dąb	100



Art. 3FEDS843428



Art. 3FEDS843430



Art. 3FEDS843432




Art. 3FEDS843434


Kosze ze stali nierdzewnej na drobne części z zamknięciem na klips

Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej organizacji oraz transportu materiałów sterylnych

NEW

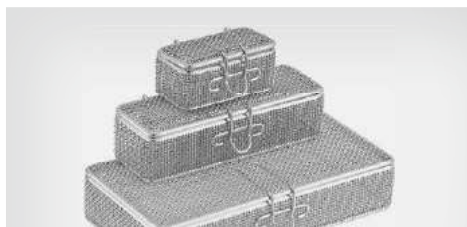

Art. 3FEDS842102 - xxx140

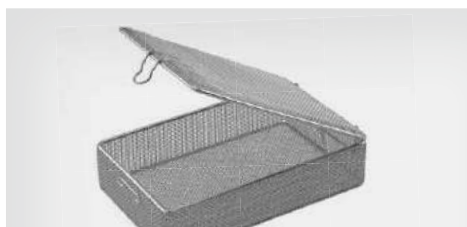

Art. 3FEDS842102 - xxx104



Art. 3FEDS842152 - xxx162

Kosze na drobne elementy służą do przygotowania różnych drobnych akcesoriów (śruby, implanty itp.) na sali operacyjnej i stanowią podstawowe wsparcie przy dekontaminacji w jednostce sterylizacyjnej. Ułatwiają również organizację instrumentów w koszu drucianym i w CSSD. Nasze kosze na małe części stanowią ekonomiczną alternatywę dla porównywalnych produktów na rynku i są zaprojektowane z myślą o wydajności i jakości.

Szeroki wybór rozmiarów zapewnia niezbędną elastyczność i może być również rozszerzony o niestandardowe warianty dla większych zakupów. Oferujemy siatki drobnziarniste o wymiarach 1,6 x 1,6 mm w standardzie oraz oczka ultradrobne o wymiarach 0,5 x 0,5 mm do zastosowań specjalnych, takich jak przygotowanie drutów typu K, sond precyzyjnych i innych drobnych części.

Każdy karton zawiera 1 sztukę

Nr art.	Opis	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Rozmiar oczek (mm)
3FEDS842102	Drobne	40 x 40 x 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842104	Drobne	40 x 40 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842106	Drobne	70 x 70 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842108	Drobne	80 x 40 x 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842110	Drobne	80 x 40 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842112	Drobne	80 x 80 x 34	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842114	Drobne	80 x 80 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842116	Drobne	80 x 80 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842118	Drobne	90 x 90 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842120	Drobne	100 x 100 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842122	Drobne	105 x 70 x 25	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842124	Drobne	150 x 50 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842126	Drobne	190 x 85 x 100	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842128	Drobne	200 x 100 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842130	Drobne	220 x 140 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842132	Drobne	235 x 155 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842134	Drobne	240 x 90 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842136	Drobne	240 x 120 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842138	Drobne	275 x 175 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842140	Drobne	275 x 200 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842152	Ultradrobne	80 x 40 x 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842154	Ultradrobne	80 x 80 x 34	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842156	Ultradrobne	100 x 100 x 50	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842158	Ultradrobne	180 x 130 x 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842160	Ultradrobne	230 x 100 x 60	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842162	Ultradrobne	240 x 120 x 60	0,5 x 0,5 x 0,3

Specjalne kosze na narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami

Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej organizacji oraz transportu narzędzi okulistycznych i stomatologicznych.

Kosze okulistyczne służą do bezpiecznego przechowywania najdrobniejszych mikroinstrumentów. Narzędzia są bezpiecznie zamocowane podczas całego cyklu dekontaminacji oraz podczas transportu. Kosze są dostępne w 3 różnych rozmiarach i mogą stanowić ekonomiczną alternatywę dla kosztownych produktów na zamówienie.

Kosze dentystyczne na narzędzia ręczne o różnych rozmiarach i kodowaniu kolorystycznym ułatwiają organizację zestawów narzędzi dostosowanych do potrzeb klienta. Konstrukcja tacek zapewnia, że narzędzia można bardzo łatwo płukać i suszyć. Zapewnia to wydajną regenerację.


Każdy karton zawiera 1 sztukę

Nr art.	Opis	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
3FEDS842202	Siatka okulistyczna (mikro) z silikonowymi uchwytami/paskami na dnie i pokrywie, ściany boczne wykonane z blachy perforowanej	240 x 250 x 40
3FEDS842204	Siatka okulistyczna (mikro) z silikonowymi uchwytami/paskami na dnie i pokrywie, ściany boczne wykonane z blachy perforowanej	340 x 250 x 40
3FEDS842206	Siatka okulistyczna (mikro) z silikonowymi uchwytami/paskami na dnie i pokrywie, ściany boczne wykonane z blachy perforowanej	440 x 250 x 40
3FEDS842252	Taca na instrumenty dentystyczne z blokadą obrotową i uchwytem sprężynowym, ściany boczne wykonane z blachy perforowanej	220 x 125 x 40
3FEDS842258	Taca na instrumenty dentystyczne z blokadą obrotową i uchwytem sprężynowym, ściany boczne wykonane z blachy perforowanej	250 x 220 x 40
3FEDS842254	Sito dentystyczne (drobne) z blokadą naprężającą z silikonowymi uchwytami na dnie i pokrywie	235 x 155 x 40
3FEDS842256	Sito dentystyczne (drobne) z blokadą naprężającą z silikonowymi uchwytami na dnie i pokrywie	240 x 90 x 40



Kosze endoskopowe na narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami



Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej organizacji oraz transportu sztywnych przedmiotów i soczewek

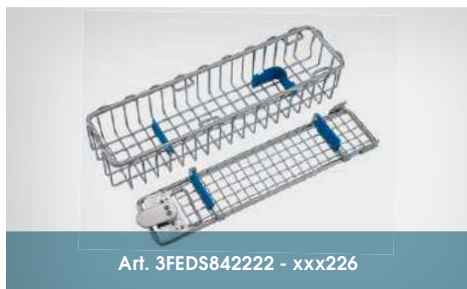

Kosze endoskopowe zapewniają bezpieczną ochronę drogich i wrażliwych endoskopów podczas całego cyklu dekontaminacji lub użytkowania i są wyposażone w blokadę obrotową.

Silikonowe podkładki na podstawie i pokrywie zapewniają stabilne trzymanie bez uszkodzania endoskopów i obiektywów.

Każdy karton zawiera 1 sztukę

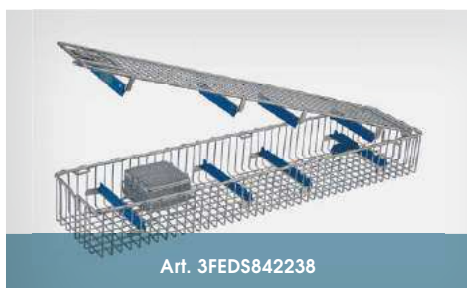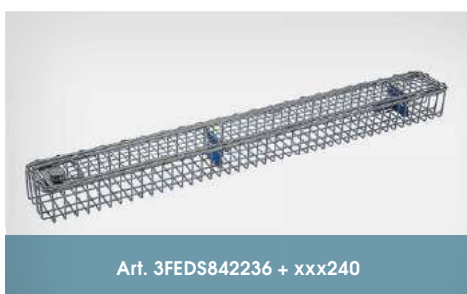

Nr art.	Opis	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
3FEDS842222	Do jednego obiektywu	180 × 80 × 52
3FEDS842224	Do jednego obiektywu	290 × 80 × 52
3FEDS842226	Do dwóch obiektywów	290 × 80 × 52
3FEDS842228	Do jednego obiektywu	460 × 80 × 52
3FEDS842230	Do dwóch obiektywów	460 × 80 × 52
3FEDS842232	Do jednego obiektywu	580 × 160 × 52
3FEDS842234	Do dwóch obiektywów	580 × 160 × 52
3FEDS842236	Do jednego obiektywu	670 × 80 × 52
3FEDS842240	Do jednego obiektywu	800 × 80 × 52
3FEDS842238	Ze zintegrowaną siatką na drobne części/na obiektyw	640 × 150 × 77

Notatki

Notatki


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zastrzeżenie:

Zajęcia, ilustracje, dane techniczne, opisy artykułów i inne informacje zawarte w tym katalogu nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez naszej wyraźnej i pisemnej zgody.

Żadne dane podane w tym katalogu nie są wiążące, nie można dochodzić roszczeń prawnych z tytułu ich wykorzystania.

Niniejszy katalog jest ważny do czasu opublikowania nowszej wersji.

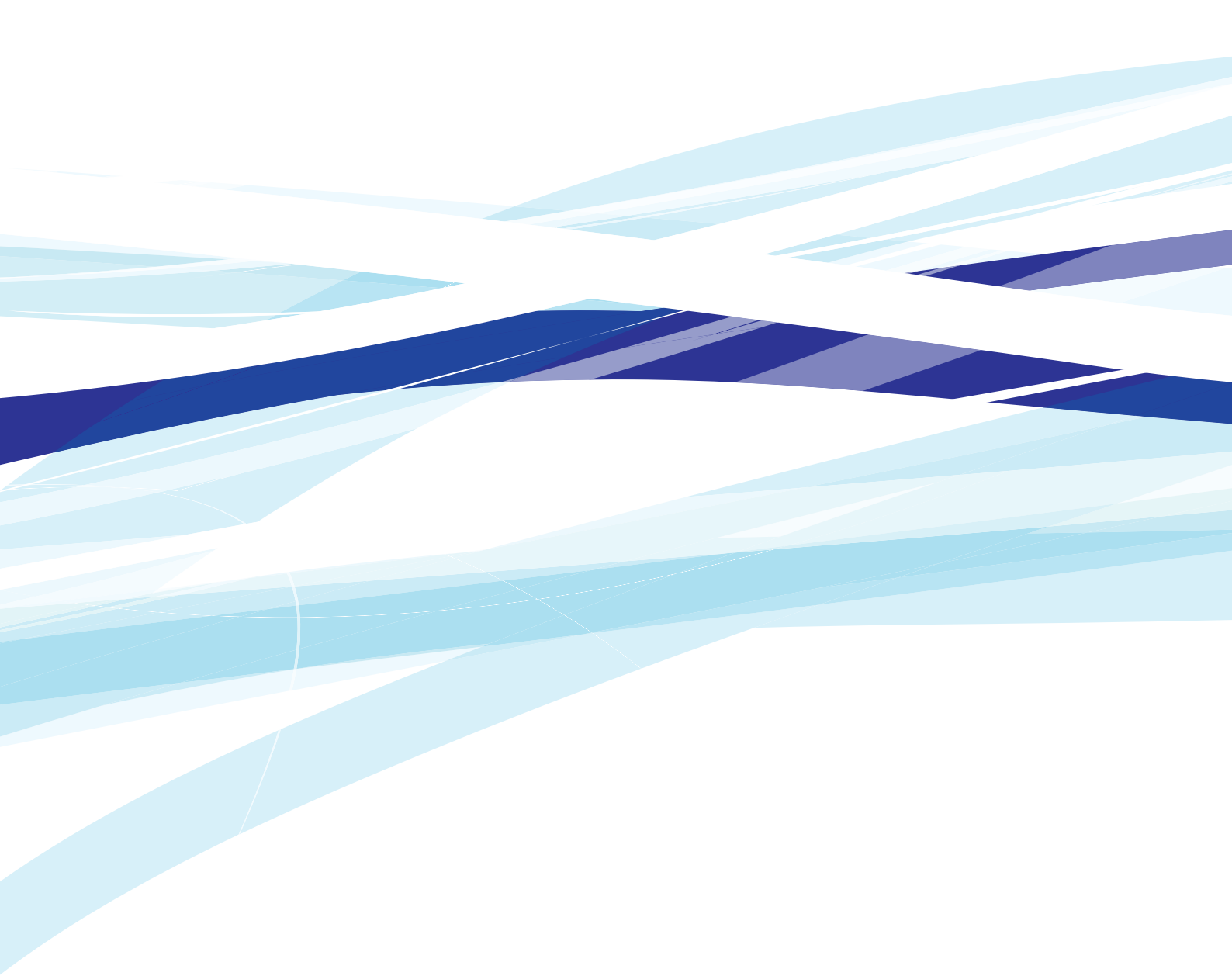

AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
tel. 22 715 71 86 do 89
fax 22 715 71 90
e-mail: biuro@amed.pl
www.amed.pl

steriCLIN®

AMED