



Steelco

Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów

dla szpitali oraz placówek opieki

Miele

Group
Member

Customization. Innovation. Excellence.

Kierując się potrzebami Klientów

Firma Steelco jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zapobiegania zakażeń, który zaopatruje rynek medyczny, laboratoryjny oraz farmaceutyczny. Działając w ponad 100 krajach, wyposażyla wiele renomowanych placówek medycznych, jak również jednostek laboratoryjnych i przemysłu farmaceutycznego.

Firma Steelco, kierując się potrzebami Klientów, rozwija, wytwarza i dostarcza rozwiązania, które zwiększają kontrolę zakażeń, bezpieczeństwo i optymalizację procesów oraz ograniczają koszty. Firma Steelco będąca jednym z najbardziej innowacyjnych producentów w dziedzinie takiej jak automatyzacja procesów, dzięki połączeniu z firmą Miele, osiągnęła dodatkowy wzrost dynamiki rozwoju technologicznego.

Autoryzowany serwis techniczny firmy Steelco, zapewnia pełną opiekę techniczną i szkolenia dla Użytkowników w zakresie eksploatacji urządzeń. Możliwość zdalnej diagnostyki i wsparcie wyszkolonego zespołu inżynierów, na całym świecie, zapewnia, że Użytkownik otrzyma wsparcie techniczne potrzebne do zachowania ciągłości pracy urządzeń.



Miele

Group
Member



Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów dla szpitali oraz placówek opieki

Szeroka gama urządzeń umożliwia firmie Steelco dostarczanie kompletnych i dostosowanych rozwiązań dla indywidualnych potrzeb. Nieskończone możliwości konfiguracji zapewniają najlepsze mycie i dezynfekcje basenów, kaczek i innych pojemników sanitarnych. Bogatą ofertę myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów można zintegrować z dedykowanymi pomieszczeniami mycia.



BP 100

Wolnostojący
lub podblatowy



BP 100 HSER

Wolnostojący lub
do zabudowy w ścianę
z toaletą



BP 100 HE

Wolnostojący lub
do zabudowy w ścianę
z toaletą



BP 100 H

Wolnostojący



BP 100 HXL

Wolnostojący



BP 100 HLA

Wolnostojący

Kluczowe zalety doskonałe połączenie

Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów oferują szeroki wybór urządzeń dostosowanych do najróżniejszych potrzeb, spełniających wymagania higieniczne.

Gwarantują niezrównane standardy higieny i mycia, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, skutecznemu suszeniu z filtrem HEPA H14 oraz dezynfekcji termicznej wszystkich wyrobów wielokrotnego użytku, takich jak baseny, kaczki i inne pojemniki sanitarne.





Wide Variety Of Supports

Myjnie-dezynfekторы do kacek i basenów są wyposażone w uniwersalny uchwyt, pozwalający na jednoczesne mycie basenów, kacek i innych pojemników sanitarnych. Dostępne są również różne uchwyty, stelaże i wkłady do innych wyrobów.



Double Drying System

Wysokowydajny system mechanicznego suszenia/chłodzenia z filtrem HEPA H14 zapewnia równomierne i szybkie suszenie, gwarantując szybkie osuszenie i schłodzenie wszystkich pojemników sanitarnych.



Infrared Hands-Free Process

Wszystkie modele myjni-dezynfektorów do kacek i basenów firmy Steelco są wyposażone w automatykę, która zapewnia personelowi bezpieczeństwo higieniczne.

Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi może odbywać się poprzez pedał nożny lub czujnik zbliżeniowy, dzięki czemu został całkowicie wyeliminowany fizyczny kontakt Użytkownika z urządzeniem.

Łaładunek zabrudzonych wyrobów odbywa się na ergonomicznej wysokości roboczej.



High Pressure Washing

Wprowadzenie tej technologii pozwala na redukcję zużycia wody, środków chemicznych i skrócenie czasu cyklu. Znakomitą skuteczność mycia osiągnięto poprzez przeprojektowanie systemu natryskowego i połączenie zarówno stałych, jak i obrotowych dysz myjących.



Washing Efficiency

Wysoką skuteczność mycia osiągnięto dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dezynfekowanych wyrobów.

Para wodna jest rozprawdzana poprzez dysze myjące, aby zapewnić pełną dezynfekcję instalacji mycia podczas każdego procesu.



Layout Optimization Solutions

Pojemność myjni zależy od wielkości i kształtu mytych wyrobów. Pojemniki na środki chemiczne mogą być przechowywane wewnątrz zamykanej na klucz szafki, znajdującej się w dolnej podstawie urządzenia.

W myjniach wbudowanych w ścianę zamykana szafka jest umieszczona w górnej części urządzenia.

Modele podblatowe mogą być wyposażone w dedykowane szafki boczne.

Zrównoważony rozwój i wydajność idą w parze



Dysze stałe i obrotowe

Skuteczne, przetestowane wyniki mycia osiągnięto dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dezynfekowanych wyrobów. Szafka zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304.

W celu wyeliminowania ryzyka zakażenia i rozwoju bakterii firma Steelco produkuje komory mycia z zaokrąglonymi narożami i z gładkimi wewnętrznymi krawędziami drzwi.

Para wodna jest rozprowadzana wewnątrz komory przez instalacje i dysze myjące, tak aby w każdym cyklu dochodziło do pełnego zdezynfekowania mytych wyrobów, komory mycia i instalacji hydraulicznych.



Mycie pod wysokim ciśnieniem

Najlepsze w swojej klasie zużycie: ilość wody dostosowana do cyklu mycia. Skuteczne mycie przy małej ilości wody.

Super szybki proces: czas cyklu dostosowany do programu mycia. Zoptymalizowany system natryskowy.

Wprowadzenie tej technologii pozwala na redukcję zużycia wody, środków chemicznych i skrócenie czasu cyklu. Znakomitą skuteczność mycia osiągnięto poprzez przeprojektowanie systemu natryskowego i połączenie zarówno stałych, jak i obrotowych dysz myjących.





Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dezynfekcja termiczna jest zalecaną i najskuteczniejszą metodą dezynfekcji wszystkich wyrobów wielokrotnego użytku, takich jak baseny, kaczki i inne pojemniki sanitarne. Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów są istotnymi urządzeniami, które pomagają kontrolować zakażenia wewnątrzszpitalne oraz poprawić warunki pracy personelu.

Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów firmy Steelco, zgodnie z normą EN ISO 15883, skutecznie eliminują spory bakterii *Clostridium difficile* z wyrobów oraz spełniają wymagania normy EN 15883-1 i -3. Potwierdzają to badania niezależnego instytutu higieny.



Doskonały przepływ pracy

Firma Steelco stworzyła pełną gamę systemów i akcesoriów przeznaczonych do kontroli zakażeń w placówkach opieki nad osobami starszymi. Niezawodne, łatwe w obsłudze oraz wydajne urządzenia zapewniają czystość i higienę według najwyższych standardów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu pomieszczeń sanitarno-higienicznych, dlatego nasze projekty są funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz ochrony pacjenta.

Steelco Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów dla szpitali oraz placówek opieki



BP 100 M/A

Podblatowe lub wolnostojące

Myjnie-dezynfektory do kacek i basenów serii BP 100 to wielofunkcyjne urządzenia do powszechnie stosowanych w szpitalach pojemników sanitarnych, takich jak kaczki i baseny. Dostępne są różne uchwyty, stelaże i wkłady do innych wyrobów.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
2 kacek i 1 basenu z pokrywą
lub 4 kacek



Modele serii BP 100 są dostępne w wersji wolnostojącej lub podblatowej, w różnych wersjach wykonania, z drzwiami otwieranymi i zamykanymi ręcznie lub automatycznie.



BP 100 HSER

Wolnostojące lub do zabudowy w ścianę

Seria BP 100 HSER jest dostępna w wersji wolnostojącej lub do zabudowy w ścianę, w różnych wersjach wykonania, z drzwiami otwieranymi i zamykanymi ręcznie lub automatycznie.

Łaładunek zabrudzonych wyrobów odbywa się na ergonomicznej wysokości roboczej. Drzwiczki pełnią rolę platformy łaaładunkowej z uchwytem. Zamknięcie drzwiczek powoduje automatyczne opróżnienie kacek i basenów.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
1 kaczki i 1 basenu z pokrywą
lub 2 kacek



Myjnie-dezynfekторы do kacek i basenów serii BP 100 HSER można zainstalować w ścianie. To rozwiązanie ogranicza do minimum transport pojemników sanitarnych pomiędzy miejscem skażenia, a miejscem dezynfekcji, minimalizując w ten sposób ryzyko infekcji.

Drzwi w pełni automatyczne

Automatyzacja w dużym stopniu pomaga zapewnić bezpieczeństwo Użytkownika. Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi może odbywać się poprzez pedał nożny lub czujnik zbliżeniowy, dzięki czemu został całkowicie wyeliminowany fizyczny kontakt Użytkownika z urządzeniem.

BP 100 HE

Wolnostojące lub do zabudowy w ścianę

Myjnie-dezynfektory do kacek i basenów serii BP 100 HE to wielofunkcyjne urządzenia do powszechnie stosowanych w szpitalach pojemników sanitarnych, takie jak baseny, kaczki i butelki do odsysania. Wysokowydajny system mechanicznego suszenia/chłodzenia z filtrem HEPA H14 zapewnia równomierne i szybkie suszenie, gwarantując szybkie osuszenie i schłodzenie wszystkich pojemników sanitarnych.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
2 kacek i 1 basenu z pokrywą
lub 3 kacek



Myjnie-dezynfektory do kacek i basenów serii BP 100 HE można zainstalować w ścianie. To rozwiązanie ogranicza do minimum transport pojemników sanitarnych pomiędzy miejscem skażenia, a miejscem dezynfekcji, minimalizując w ten sposób ryzyko infekcji.

Najwyższej jakości materiały

Wysokiej jakości rama jest wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 oraz zapewnia długoterminową niezawodność i czystość urządzenia. Stałe i obrotowe dysze myjące zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dezynfekowanych wyrobów.

BP 100 H

Wolnostojące

Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów serii BP 100 H to średniej pojemności, wielofunkcyjne urządzenia do powszechnie stosowanych w szpitalach pojemników sanitarnych, takich jak baseny, kaczki i butelki do odsysania.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
2 kaczek i 1 basenu z pokrywą
lub 2 kaczek



Wyświetlacz LCD oraz higieniczne przyciski łokciowe do wyboru programu to szybki i łatwy sposób na rozpoczęcie cyklu bez użycia rąk, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.



Myjnie-dezynfektory serii BP 100 H są dostępne z drzwiami otwieranymi ręcznie, automatycznie lub półautomatycznie.

Wydajność mycia

Para wodna jest rozprowadzana poprzez dysze myjące, aby zapewnić pełną dezynfekcję instalacji mycia podczas każdego procesu.

BP 100 HXL

Myjnie-dezynfektory do kacek i basenów o dużej pojemności

Seria BP 100 HXL to urządzenia do mycia kacek i basenów o dużej pojemności i zmiennym obciążeniu, które zapewniają bezpieczeństwo higieniczne zarówno pacjentów, jak i personelu.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
4 kacek i 2 basenów z pokrywkami
lub 4 kacek i 2 wiader lub
1 pojemnika do krzeseł toaletowych



Myjnia jest wyposażona w uchwyt wielofunkcyjny. Pozwala on na jednoczesne mycie kacek, basenów, butelek do odsysania czy wiader. Dostępne są również różne rodzaje stelaży i wkładów, pozwalające na mycie i dezynfekcję innych wyrobów.



Pojemniki na środki chemiczne mogą być przechowywane wewnątrz zamkniętej na klucz szafki, znajdującej się w dolnej podstawie urządzenia.

Przyjazny dla Użytkownika panel sterowania

Przyjazny dla Użytkownika, dotykowy panel sterowania z graficznym kolorowym wyświetlaczem LCD jest wyposażony w funkcję autodiagnostyki. Pozwala na optymalizację całego procesu poprzez dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb.


BP 100 HLA

Automatyczne drzwi przesuwne
w całości wykonane z hartowanego szkła (HST)

Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów serii BP 100 HLA są przeznaczone do automatycznego opróżniania, mycia i dezynfekcji kaczek i basenów. Zastosowane rozwiązania poprawiają warunki pracy personelu, optymalizują rezultaty mycia i dezynfekcji oraz w sposób znaczący zmniejszają ryzyko dekontaminacji.



Jednoczesne mycie i dezynfekcja
2 kaczek i 1 basenu z pokrywą
lub inne kombinacje z butelkami
do odsysania lub wiadrami

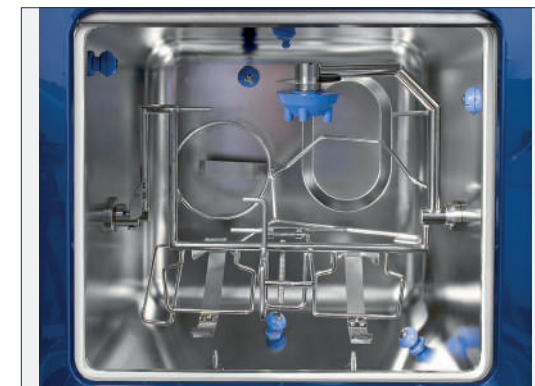

Wysoka efektywność mycia została uzyskana dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz mytych wyrobów.



Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi może odbywać się poprzez pedał nożny lub czujnik zbliżeniowy, dzięki czemu został całkowicie wyeliminowany fizyczny kontakt Użytkownika z urządzeniem.

Przesuwne drzwi szklane

Seria BP 100 HLA posiada drzwi przesuwne, z hartowanego szkła HST. Wielofunkcyjny uchwyt/stelaż umożliwia jednocześnie mycie kaczek, basenów, butelek do odsysania lub wiader.

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe idą w parze



Uchwyty do wyrobów

Myjnia jest wyposażona w uchwyt wielofunkcyjny. Pozwala on na jednoczesne mycie kaczek, basenów, butelek do odsysania czy wiader.

Firma Steelco oferuje szeroką gamę wkładów na pojemniki, które są powszechnie stosowane w różnych krajach. Dostępne są również różne rodzaje stelaży oraz wkładów, pozwalających na mycie i dezynfekcję innych wyrobów.

Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria mają kluczowe znaczenie dla wydajnego i przyjaznego dla Użytkownika przebiegu dezynfekcji. Firma Steelco oferuje kompleksową gamę akcesoriów, takich jak szafki z lub bez zlewu, zlewy użytkowe, wieszaki i uchwyty ściennie do suszenia oraz przechowywania basenów i kaczek.



Wsuwany kosz od mycia i dezynfekcji małych wyrobów



Wyjmowana półka, umieszczana na dole komory, umożliwiająca mycie i dezynfekcję dużych wiader i misek



Specjalny obrotowy uchwyt ułatwiający załadunek wyrobów



Zlewy użytkowe w wersji ręcznej lub automatycznej



Wieszaki oraz uchwyty ściennie na kaczki i baseny

Środki chemiczne do myjni-dezynfektorów do kacek i basenów

Środek odkamieniający ProCare Med 10 BPD do myjni-dezynfektorów do kacek i basenów

Środek odkamieniający zapobiega tworzeniu się kamienia szczególnie na elementach grzejnych i komorze mycia, który może wydłużać cykle i zwiększać koszty mediów. Użycie środka ProCare Med 10 BPD wydłuża żywotność urządzenia i wsadów, gdyż może zmniejszać przebarwienia basenów i kacek z tworzywa sztucznego.



Pojemność: 5 l

- + Środek odkamieniający na bazie kwasu cytrynowego
- + Zapobiega powstawaniu kamienia w komorze, elementach grzejnych i wsadach
- + Można stosować również z twardą wodą
- + Niskopieniąca formuła
- + Niskie dozowanie od 0,5 do 1,5 ml/l w zależności od stopnia twardości wody

Środek chemiczny ProCare Med 10 BPA do myjni-dezynfektorów do kacek i basenów

Alkaliczny środek chemiczny zapewniający doskonałe rezultaty mycia, stosowany w myjniach-dezynfektorach do kacek i basenów.



Pojemność: 5 l

- + Płynny, alkaliczny koncentrat środka chemicznego
- + Niskopieniący
- + Usuwa uporczywe zabrudzenia
- + Niskie dozowanie 1-3 ml/l w zależności od twardości wody
- + Odpowiedni do cykli usuwania sporów bakterii Clostridium Difficile
- + Odpowiedni do urządzeń wyposażonych w 2 pompy dozujące

Wymiary

Model		Wymiary zewnętrzne (s x g x w)		
BP 100 M BP 100 A		600 mm	600 mm	850 mm
BP 100 M9 BP 100 A9		900 mm	600 mm	850 mm
BP 100 HSER		450 mm	500 mm	1320 mm
BP 100 HSER zabudowa w ścianie		505 mm	520 mm	1525 mm
BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HAE		545 mm	475 mm	1630 mm
BP 100 HE zabudowa w ścianie		595 mm	475 mm	1753 mm
BP 100 H BP 100 HA		450 mm	500 mm	1320 mm
BP 100 HXL		602 mm	560 mm	1695 mm
BP 100 HLA		600 mm	610 mm	1750 mm



Customization. Innovation. Excellence.

Partner Steelco w Polsce



AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7157186
Fax +48 22 7157190
biuro@amed.pl
www.amed.pl

STEELCO - Miele Group Member

Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Oddziały:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEA
Dubai, UAE
info-mea@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Glostrup, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com



*Tylko dla wyrobów wymienionych
na certyfikacie 909/MDD